

Сфокусируйтесь на здоровье  
пациентов – с остальным поможет



# КАССЕТЫ К АППАРАТАМ ЛИНЕЙНЫМ СШИВАЮЩИМ



ALFAMEDEX.RU

КАТАЛОГ



# КАССЕТЫ К АППАРАТАМ ЛИНЕЙНЫМ СШИВАЮЩИМ




Обеспечивают формирование механического шва с фиксированной высотой скобы.

- Шахматный порядок скоб в кассетах обеспечивает повышенную герметичность шва и позволяет сформировать надёжный гемостаз, сохраняя равномерное микроциркуляторное подпитывание культи.


- В-образная форма скоб позволяет надёжно зафиксировать ткань, исключая её повышенное сдавливание после прошивания, что снижает риск некроза в послеоперационный период.

- Цветокodировка кассет помогает специалисту быстро идентифицировать изделия, делая процесс их подбора во время манипуляций более удобным.

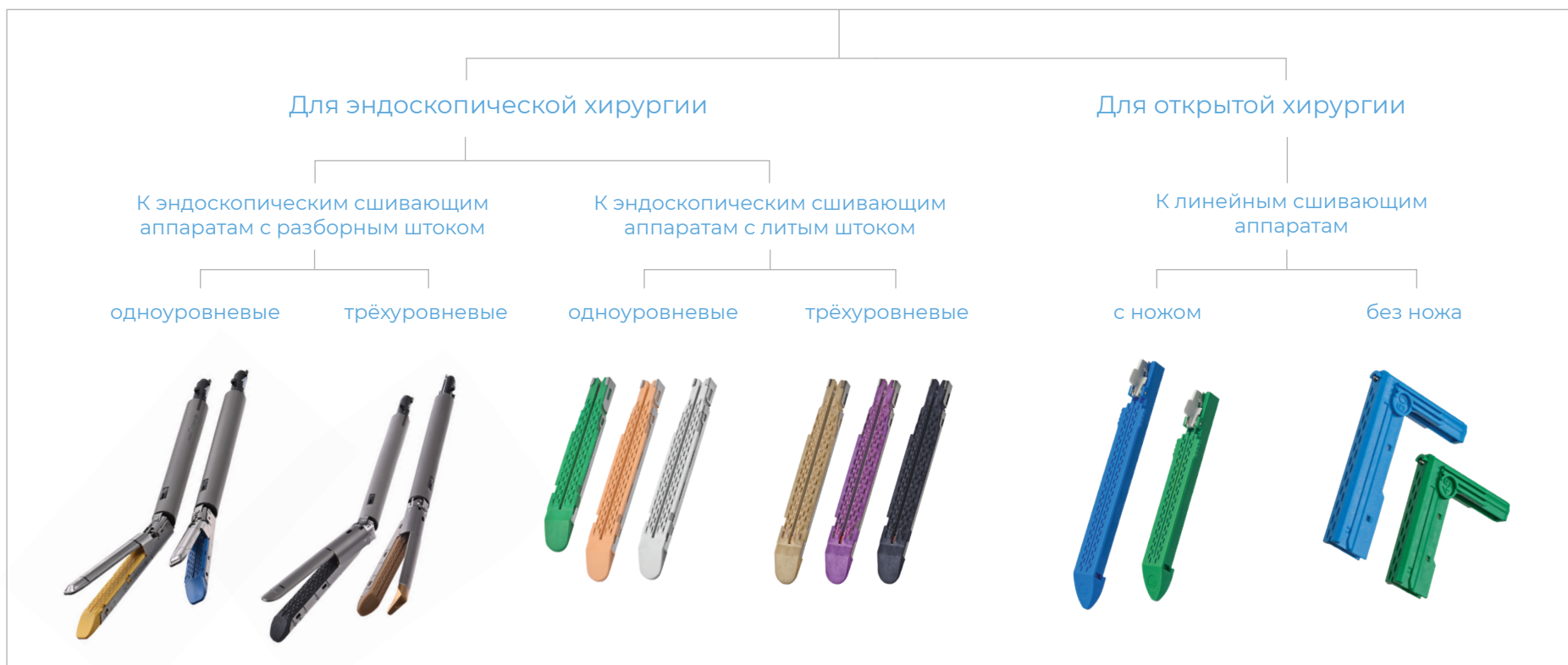


# КАССЕТЫ К АППАРАТАМ ШИВАЮЩИМ ЛИНЕЙНЫМ ЭНДОСКОПИЧЕСКИМ

Кассеты к аппаратам шивающим линейным эндоскопическим с одноуровневыми скобами

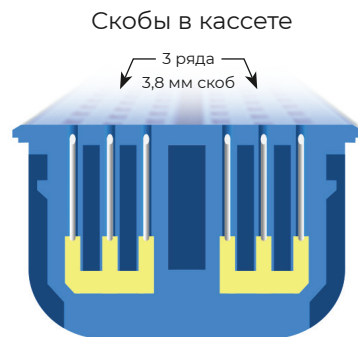


Профиль одноуровневого накладки скоб

Кассеты к аппаратам шивающим линейным эндоскопическим с трёхуровневыми скобами

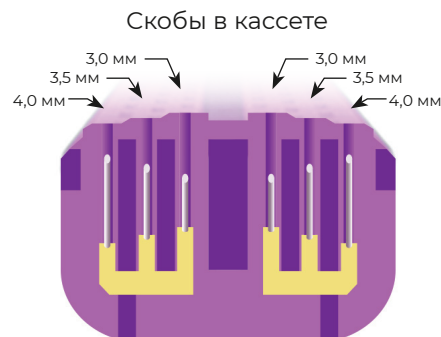


Профиль трёхуровневого накладки скоб

Распределение нагрузки на ткани

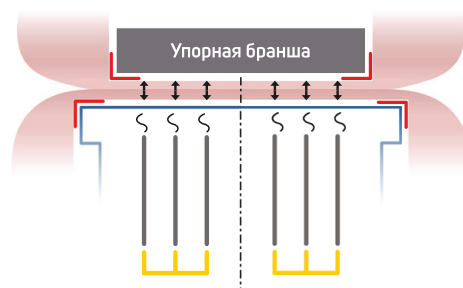

Распределение нагрузки на ткани

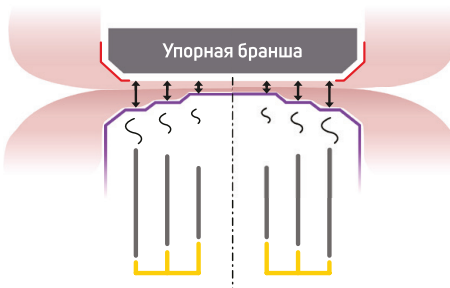

- ✓ Артикуляция кассет на 45° в каждую сторону облегчает доступ специалиста к труднодоступным местам, позволяя располагать кассету под необходимым углом.
- ✓ Скобы накладываются друг за другом, снижая боковую диффузию тканевой жидкости, формируя максимально герметичный анастомоз.
- ✓ Кассеты с трёхуровневым наложением скоб имеют разную высоту скоб до и после прошивания, позволяя создавать анастомоз в более широком диапазоне толщины.
- ✓ Ключевидный дистальный конец кассет улучшает обзорность при манипуляциях, увеличивая манёвренность в труднодоступных местах.



# КАССЕТЫ К АППАРАТАМ ЭНДОСКОПИЧЕСКИМ С РАЗБОРНЫМ ШТОКОМ



✓ Поставляются по 6 штук в упаковке.

✓ Стерильные медицинские изделия для однократного применения.

## Кассеты с одноуровневым накладыванием скоб

Цвет и REF кассеты	REF совместимого аппарата	Длина шва, мм	Кол-во рядов скоб	Высота открытой скобы, мм	Высота закрытой скобы, мм	Упаковка (инд./гр.)
□ 1847-VEAFS30W-B	1847-VEM-B 1847-VEL-B	30	6	2,5	1,0	6/36
□ 1847-VEAFS45W-B		45	6	2,5	1,0	6/36
■ 1847-VEAFS45B-B		45	6	3,8	1,5	6/36
■ 1847-VEAFS45Y-B		45	6	4,1	1,75	6/36
■ 1847-VEAFS45G-B		45	6	4,5	2,0	6/36
□ 1847-VEAFS60W-B		60	6	2,5	1,0	6/36
■ 1847-VEAFS60B-B		60	6	3,8	1,5	6/36
■ 1847-VEAFS60Y-B		60	6	4,1	1,75	6/36
■ 1847-VEAFS60G-B		60	6	4,5	2,0	6/36

! ■ Зелёные кассеты совместимы с 15 мм троакаром

Стандартный дистальный конец

6 рядов скоб, расположенных в шахматном порядке

Артикуляция кассет на 45° в каждую сторону

Цвет кассеты и тип прошиваемой ткани:

□ Сосудистая   ■ Стандартная   ■ Среднеутолщённая   ■ Утолщённая

## Кассеты с трёхуровневым накладыванием скоб

Цвет и REF кассеты	REF совместимого аппарата	Длина шва, мм	Кол-во рядов скоб	Высота открытой скобы, мм	Высота закрытой скобы, мм	Упаковка (инд./гр.)
Стандартные						
 1847-VEAT45T-B	1847-VEM-B 1847-VEL-B	45	6	2,0/2,5/3,0	0,88–1,5	6/36
 1847-VEAT45P-B		45	6	3,0/3,5/4,0	1,5–2,25	6/36
 1847-VEAT45B-B		45	6	4,0/4,5/5,0	2,25–3,0	6/36
 1847-VEAT60T-B		60	6	2,0/2,5/3,0	0,88–1,5	6/36
 1847-VEAT60P-B		60	6	3,0/3,5/4,0	1,5–2,25	6/36
 1847-VEAT60B-B		60	6	4,0/4,5/5,0	2,25–3,0	6/36
Клювовидные						
 1847-VEART45TC-B	1847-VEM-B 1847-VEL-B	45	6	2,0/2,5/3,0	0,88–1,5	6/36
 1847-VEART60TC-B		60	6	2,0/2,5/3,0	0,88–1,5	6/36
 1847-VEART60PC-B		60	6	3,0/3,5/4,0	1,5–2,25	6/36

! ■ Чёрные кассеты совместимы с 15 мм троакаром

Стандартный дистальный конец

6 рядов скоб, расположенных в шахматном порядке

Клювовидный дистальный конец

Артикуляция кассет на 45° в каждую сторону

Цвет кассеты и тип прошиваемой ткани:

■ Сосудистая и Нормальная   ■ Нормальная и Утолщённая   ■ Сверхутолщённая




# КАССЕТЫ К АППАРАТАМ ЭНДОСКОПИЧЕСКИМ С ЛИТЫМ ШТОКОМ

✓ Поставляются по 12 штук в упаковке.

✓ Стерильные медицинские изделия для однократного применения.

## Кассеты с одноуровневым накладыванием скоб

Цвет и REF кассеты	REF совместимого аппарата	Длина шва, мм	Кол-во рядов скоб	Высота открытой скобы, мм	Высота закрытой скобы, мм	Упаковка (инд./гр.)
□ 1847-VER45W-BPPW	ELM45	45	6	2,5	1,0	12/72
■ 1847-VER45B-BPPW	ELL45	45	6	3,5	1,5	12/72
■ 1847-VER45Y-BPPW	1847-VPEM45-BPW	45	6	3,8	1,8	12/72
■ 1847-VER45G-BPPW	1847-VPEL45-BPW	45	6	4,1	2,0	12/72
□ 1847-VER60W-BPPW	ELM60	60	6	2,5	1,0	12/72
■ 1847-VER60B-BPPW	ELL60	60	6	3,5	1,5	12/72
■ 1847-VER60Y-BPPW	1847-VPEM60-BPW	60	6	3,8	1,8	12/72
■ 1847-VER60G-BPPW	1847-VPEL60-BPW	60	6	4,1	2,0	12/72

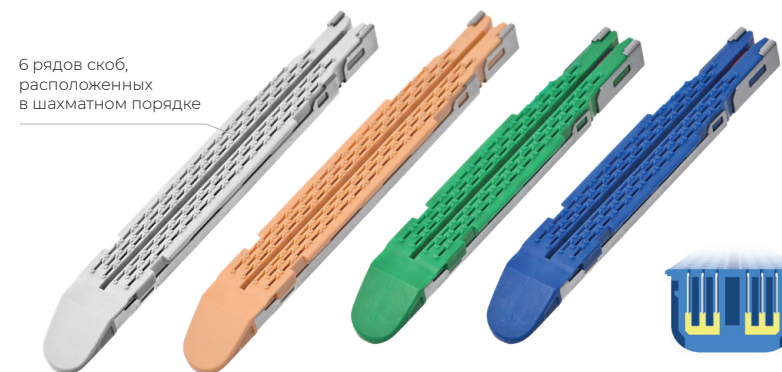

Цвет кассеты и тип прошиваемой ткани:

□ Сосудистая    ■ Среднеутолщённая    ■ Утолщённая    ■ Стандартная

## Кассеты с трёхуровневым накладыванием скоб

Цвет и REF кассеты	REF совместимого аппарата	Длина шва, мм	Кол-во рядов скоб	Высота открытой скобы, мм	Высота закрытой скобы, мм	Упаковка (инд./гр.)
■ 1847-VET45T-BPPW	ELM45	45	6	2,0/2,5/3,0	0,8-1,2	12/72
■ 1847-VET45P-BPPW	ELL45	45	6	3,0/3,5/4,0	1,2-1,8	12/72
■ 1847-VET45D-BPPW	1847-VPEM45-BPW	45	6	4,0/4,5/5,0	1,8-2,2	12/72
■ 1847-VET60T-BPPW	1847-VPEL45-BPW	45	6	4,0/4,5/5,0	1,8-2,2	12/72
■ 1847-VET60T-BPPW	ELM60	60	6	2,0/2,5/3,0	0,8-1,2	12/72
■ 1847-VET60P-BPPW	ELL60	60	6	3,0/3,5/4,0	1,2-1,8	12/72
■ 1847-VET60D-BPPW	1847-VPEM60-BPW	60	6	4,0/4,5/5,0	1,8-2,2	12/72
■ 1847-VET60D-BPPW	1847-VPEL60-BPW	60	6	4,0/4,5/5,0	1,8-2,2	12/72



Цвет кассеты и тип прошиваемой ткани:

■ Сосудистая и Нормальная    ■ Нормальная и Утолщённая    ■ Сверхутолщённая

! Все кассеты совместимы с 12 мм троакаром




## КАССЕТЫ К АППАРАТАМ СШИВАЮЩИМ ЛИНЕЙНЫМ С НОЖОМ

- ✓ Нож в кассете помогает безупречно рассекать ткань с каждой сменой кассеты.
- ✓ Поставляются по 6 штук в упаковке.
- ✓ Стерильные медицинские изделия для однократного применения.

### Размерный ряд

Цвет и REF кассеты	REF совместимого аппарата	Высота открытой скобы кассеты, мм		Высота закрытой скобы, мм	Длина шва, мм	Кол-во рядов скоб	Упаковка (инд./гр.)
		предустановленной	отдельно поставляемой				
■ 1847-VLSC60B-B	1847-VLC-B60-B	3,8	3,8	1,5	60	4	6/36
■ 1847-VLSC60G-B	1847-VLC-G60-B	4,5	4,5	2,0			
■ 1847-VLSC80B-B	1847-VLC-B80-B	3,8	3,8	1,5	80	4	6/36
■ 1847-VLSC80G-B	1847-VLC-G80-B	4,5	4,5	2,0			
■ 1847-VLSC100B-B	1847-VLC-B100-B	3,8	3,8	1,5	100	4	6/36
■ 1847-VLSC100G-B	1847-VLC-G100-B	4,5	4,5	2,0			

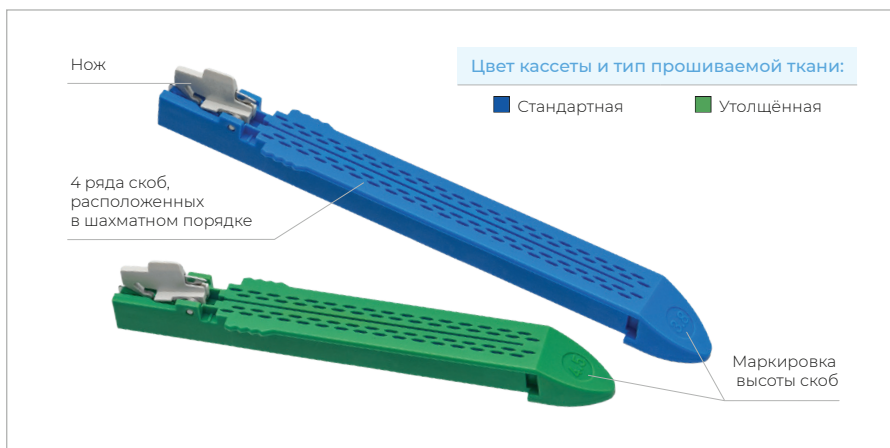

## КАССЕТЫ К АППАРАТАМ СШИВАЮЩИМ ЛИНЕЙНЫМ БЕЗ НОЖА



- ✓ Выдвижной механизм позволяет смещать сшивающий аппарат вдоль трубчатого органа без выскальзывания ткани, что обеспечивает возможность фиксации и необходимого позиционирования ткани до прошивания.
- ✓ Маркировка высоты скоб кассеты облегчает визуальную идентификацию, делая процесс подбора кассет более удобным для специалиста.
- ✓ Поставляются по 6 штук в упаковке.
- ✓ Стерильные медицинские изделия для однократного применения.

### Размерный ряд

Цвет и REF кассеты	REF совместимого аппарата	Высота открытой скобы кассеты, мм		Высота закрытой скобы, мм	Длина шва, мм	Кол-во рядов скоб	Упаковка (инд./гр.)
		предустановленной	отдельно поставляемой				
■ 1847-VLS30B-B	1847-VL-B30-B	3,5	3,8	1,5	30	2	6/36
■ 1847-VLS30G-B	1847-VL-G30-B	4,5	4,5	2,0			
■ 1847-VLS45B-B	1847-VL-B45-B	3,5	3,8	1,5	45	2	6/36
■ 1847-VLS45G-B	1847-VL-G45-B	4,5	4,5	2,0			
■ 1847-VLS60B-B	1847-VL-B60-B	3,5	3,8	1,5	60	2	6/36
■ 1847-VLS60G-B	1847-VL-G60-B	4,5	4,5	2,0			





АльфаМедЭкс