

Сфокусируйтесь на здоровье
пациентов – с остальным поможет



АППАРАТЫ СШИВАЮЩИЕ



ALFAMEDEX.RU

КАТАЛОГ

АППАРАТЫ СШИВАЮЩИЕ




Сшивающие аппараты предназначены для механического соединения органов и тканей. Благодаря изделиям снижается риск контаминации, обеспечивается герметичность шва и снижается риск кровопотери.

✓ В ассортименте представлены сшивающие аппараты для открытой и эндоскопической хирургии, которые помогают выполнять как линейные, так и циркулярные анастомозы.





АППАРАТЫ СШИВАЮЩИЕ ЛИНЕЙНЫЕ ЭНДОСКОПИЧЕСКИЕ

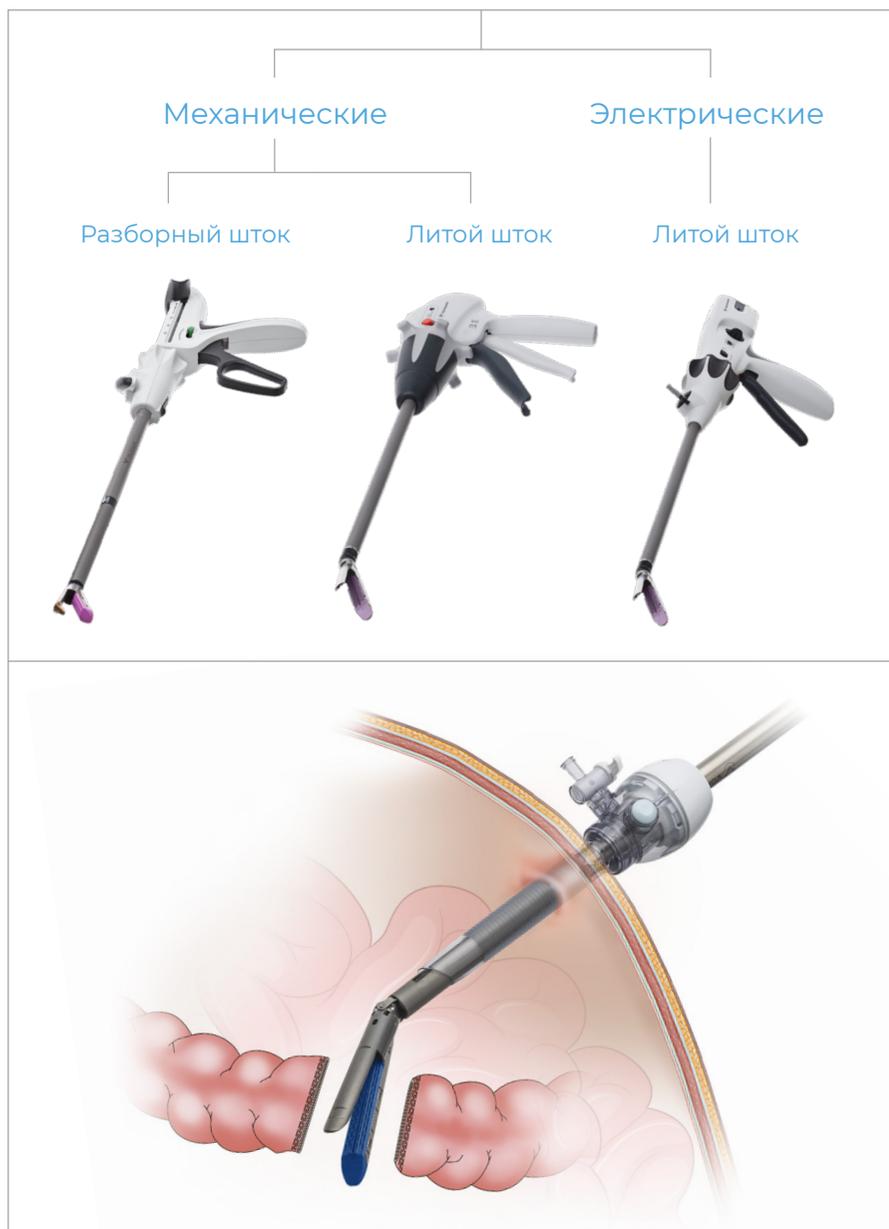

Применяются в открытой и эндоскопической хирургии для наложения механического шва, разреза и создания анастомозов: «бок в бок», «конец в бок».

- ✓ Три варианта длины штока (50, 150, 250 мм) позволяют использовать сшивающие аппараты от торакальной хирургии до бариатрии.
- ✓ Шток с антибликовым покрытием улучшает визуализацию операционного поля, обеспечивает безопасность эндоскопических манипуляций.
- ✓ Механизм поворота кассеты помогает достичь угла изгиба 45° в каждую сторону, увеличивая манёвренность при прошивании, что особенно важно во время малоинвазивных операций.
- ✓ Ротация штока сшивающего аппарата на 360° позволяет расположить кассету в необходимой плоскости, давая специалисту возможность с большим комфортом совершать манипуляции.
- ✓ Предохранитель, расположенный на рукоятке сшивающего аппарата, исключает незапланированное прошивание.

АППАРАТЫ СШИВАЮЩИЕ МЕХАНИЧЕСКИЕ С РАЗБОРНЫМ ШТОКОМ



- ✓ Аппараты подходят для работы с кассетами с трёхуровневым и одноуровневым накладыванием скоб, позволяя специалисту подобрать привычный вариант высоты предустановленных скоб в кассету.
- ✓ Кнопка отсоединения кассеты в конструкции сшивающего аппарата делает процедуру понятной и лёгкой для специалиста, помогая достичь уверенности в каждом движении.
- ✓ Поставляются без предустановленной кассеты.
- ✓ Стерильные медицинские изделия для однократного применения.

Размерный ряд

REF	Длина штока, мм	Упаковка (инд./тр.)
1847-VES-B	50	1/3
1847-VEM-B	150	1/3
1847-VEL-B	250	1/3

Совместимость аппаратов и кассет

REF аппарата	Цвет и REF кассеты		
	с одноуровневым накладыванием скоб	с трёхуровневым накладыванием скоб	с трёхуровневым накладыванием скоб ключевидные
1847-VES-B	□ 1847-VEAFS30W-B	■ 1847-VEAT45T-B	■ 1847-VEART45TC-B
1847-VEM-B	□ 1847-VEAFS45W-B	■ 1847-VEAT45P-B	■ 1847-VEART60TC-B
1847-VEL-B	■ 1847-VEAFS45B-B	■ 1847-VEAT45B-B	■ 1847-VEART60PC-B
	■ 847-VEAFS45G-B	■ 1847-VEAT60T-B	
	□ 1847-VEAFS60W-B	■ 1847-VEAT60P-B	
	■ 1847-VEAFS60B-B	■ 1847-VEAT60B-B	
	■ 1847-VEAFS60G-B		



АППАРАТЫ ШИВАЮЩИЕ МЕХАНИЧЕСКИЕ С ЛИТЫМ ШТОКОМ



- ✓ Аппараты подходят для работы с кассетами с трёхуровневым и одноуровневым накладыванием скоб, позволяя специалисту подобрать привычный вариант высоты предустановленных скоб в кассету.
- ✓ Конструктивно аппарат представляет собой систему, состоящую из последовательно соединённых рычажных механизмов, которые обеспечивают максимальную лёгкость выполнения манипуляций.
- ✓ Раздельные рукоятки для сведения браншей и прошивания позволяют осуществлять манипуляции одной рукой, делая процедуру более удобной.
- ✓ Активатор возврата ножа обеспечивает ручное возвращение ножа в случае, если специалисту не требуется полное рассечение ткани.
- ✓ Аппараты поставляются без предустановленной кассеты.
- ✓ Стерильные медицинские изделия для однократного применения.

Размерный ряд

REF	Длина ствола, мм	Длина шва, мм	Упаковка (инд./гр.)
ELM45	340	45	1/3
ELL45	440	45	1/3
ELM60	340	60	1/3
ELL60	440	60	1/3

Совместимость аппаратов и кассет

REF аппарата	Цвет и REF кассеты	
	с одноуровневым накладыванием скоб	с трёхуровневым накладыванием скоб
ELM45 ELL45	<ul style="list-style-type: none"> □ 1847-VER45W-BPPW ■ 1847-VER45B-BPPW ■ 1847-VER45Y-BPPW ■ 1847-VER45G-BPPW 	<ul style="list-style-type: none"> ■ 1847-VET45T-BPPW ■ 1847-VET45P-BPPW ■ 1847-VET45D-BPPW
ELM60 ELL60	<ul style="list-style-type: none"> □ 1847-VER60W-BPPW ■ 1847-VER60B-BPPW ■ 1847-VER60Y-BPPW ■ 1847-VER60G-BPPW 	<ul style="list-style-type: none"> ■ 1847-VET60T-BPPW ■ 1847-VET60P-BPPW ■ 1847-VET60D-BPPW

АППАРАТЫ ШИВАЮЩИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ С ЛИТЫМ ШТОКОМ



- ✓ Аппараты подходят для работы с кассетами с трёхуровневым и одноуровневым накладыванием скоб, позволяя специалисту подобрать привычный вариант высоты предустановленных скоб в кассету.
- ✓ Автоматизированный процесс прошивания обеспечивает минимальное движение браншей шивающего аппарата при рассечении и прошивании тканей.
- ✓ Усовершенствованная система компрессии тканей позволяет формировать качественный шов.
- ✓ Возможность возврата ножа вручную обеспечивает полный контроль над процессом даже при условии отключения питания.
- ✓ В комплектацию входит насадка в виде клюва для маневренной работы и дополнительной фиксации тканей.
- ✓ Аппараты поставляются без предустановленной кассеты.
- ✓ Стерильные медицинские изделия для однократного применения.

Размерный ряд


REF	Длина ствола, мм	Индикатор заряда	Длина шва, мм	Упаковка (инд./гр.)
1847-VP45-BPW	340	-	45	1/3
1847-VP45-BPWL	340	есть	45	1/3
1847-VP45-BPW	440	-	45	1/3
1847-VP60-BPW	340	-	60	1/3
1847-VP60-BPWL	340	есть	60	1/3
1847-VP60-BPW	440	есть	60	1/3
1847-VP60-BPW	440	-	60	1/3

Совместимость аппаратов и кассет

REF аппарата	Цвет и REF кассеты	
	с одноуровневым накладыванием скоб	с трёхуровневым накладыванием скоб
1847-VP45-BPW 1847-VP45-BPWL 1847-VP45-BPW	<input type="checkbox"/> 1847-VER45W-BPPW <input checked="" type="checkbox"/> 1847-VER45B-BPPW <input checked="" type="checkbox"/> 1847-VER45Y-BPPW <input checked="" type="checkbox"/> 1847-VER45G-BPPW	<input checked="" type="checkbox"/> 1847-VET45T-BPPW <input checked="" type="checkbox"/> 1847-VET45P-BPPW <input checked="" type="checkbox"/> 1847-VET45D-BPPW
1847-VP60-BPW 1847-VP60-BPWL 1847-VP60-BPWL 1847-VP60-BPW	<input type="checkbox"/> 1847-VER60W-BPPW <input checked="" type="checkbox"/> 1847-VER60B-BPPW <input checked="" type="checkbox"/> 1847-VER60Y-BPPW <input checked="" type="checkbox"/> 1847-VER60G-BPPW	<input checked="" type="checkbox"/> 1847-VET60T-BPPW <input checked="" type="checkbox"/> 1847-VET60P-BPPW <input checked="" type="checkbox"/> 1847-VET60D-BPPW



АППАРАТЫ ЛИНЕЙНЫЕ СШИВАЮЩИЕ БЕЗ НОЖА

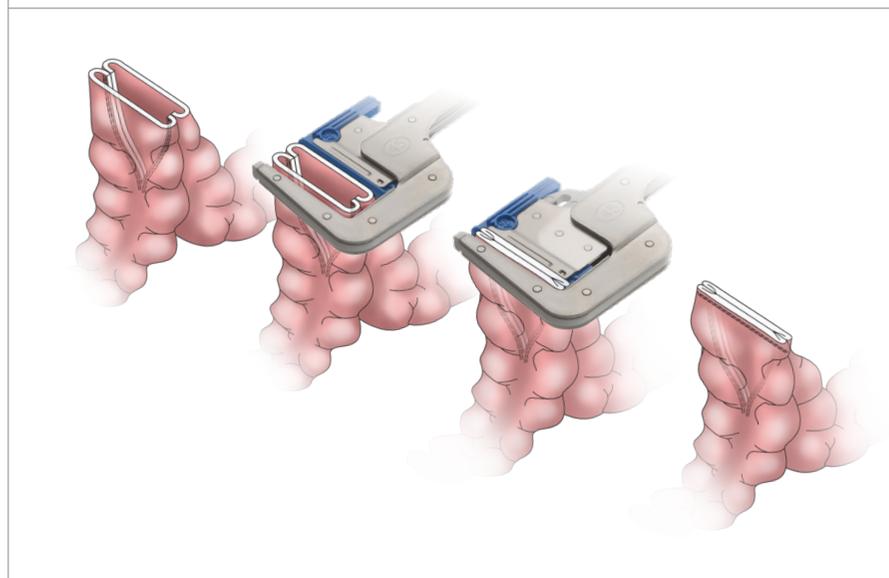


Обеспечивают формирование двухрядного скобочного шва с фиксированной высотой закрытой скобы В-образной формы. Используются преимущественно в абдоминальной и торакальной хирургии для создания швов: «бок в бок», «конец в бок».

- ✓ Выдвижной механизм позволяет смещать сшивающий аппарат вдоль трубчатого органа без выскальзывания ткани, что помогает её фиксировать и удобно размещать до прошивания.
- ✓ Длинный шток изделия гарантирует оптимальный доступ к прошиваемому органу, обеспечивая максимальный визуальный контроль при работе.
- ✓ Прорезиненная поверхность аппарата снижает риск его выскальзывания в ходе операции, позволяя проводить манипуляции безопасно.
- ✓ Чёрная кнопка на проксимальном конце аппарата помогает раскрыть кассету в случае её некорректного расположения на ткани, уменьшая вероятность возникновения ошибки в процессе операции.
- ✓ Аппараты поставляются с предустановленной кассетой.
- ✓ Стерильные медицинские изделия для однократного применения.

Размерный ряд

REF аппарата	Цвет и REF совместимых кассет	Высота открытой скобы кассеты, мм		Высота закрытой скобы, мм	Длина шва, мм	Кол-во рядов скоб	Упаковка (инд./гр.)
		предустановленной	отдельно поставляемой				
1847-VL-B30-B	■ 1847-VLS30B-B	3,5	3,8	1,5	30	2	1/3
1847-VL-G30-B	■ 1847-VLS30G-B	4,5	4,5	2,0			
1847-VL-B45-B	■ 1847-VLS45B-B	3,5	3,8	1,5	45	2	1/3
1847-VL-G45-B	■ 1847-VLS45G-B	4,5	4,5	2,0			
1847-VL-B60-B	■ 1847-VLS60B-B	3,5	3,8	1,5	60	2	1/3
1847-VL-G60-B	■ 1847-VLS60G-B	4,5	4,5	2,0			

АППАРАТЫ ШИВАЮЩИЕ ЛИНЕЙНЫЕ С НОЖОМ, ИНТЕГРИРОВАННЫМ В КАССЕТУ

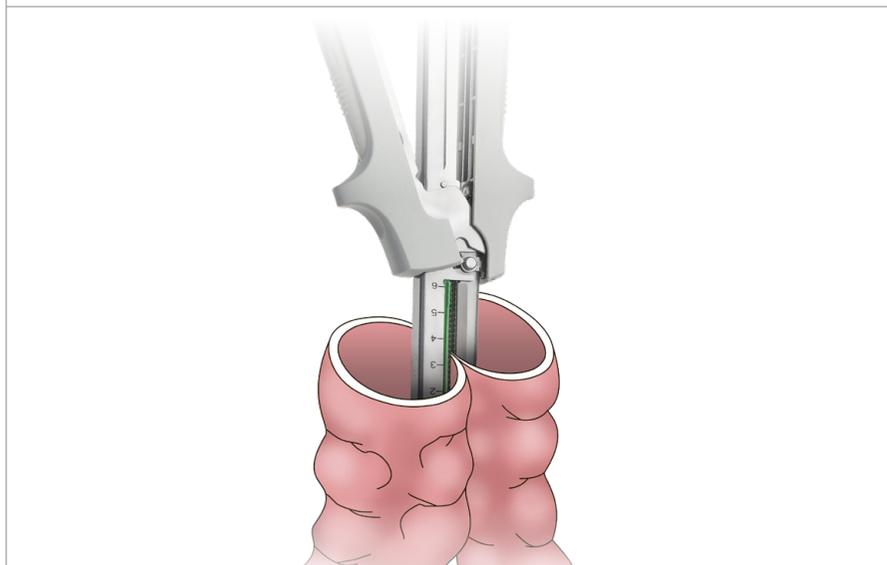

Обеспечивают формирование четырёхрядного линейного скобочного шва с одномоментным рассечением ткани между вторым и третьим рядами. Используются в открытой хирургии для создания швов: «бок в бок», «конец в бок».

- ✓ Нож в кассете помогает безупречно рассекать ткань с каждой сменой кассеты.
- ✓ Ползунок на корпусе рукоятки активирует толкатель скоб, позволяя герметично прошивать ткань.
- ✓ Промежуточное положение шивающего аппарата повышает манёвренность специалиста и помогает накладывать шов в необходимой плоскости.
- ✓ Прорезиненная поверхность шивающего аппарата снижает риск его выскальзывания в ходе операции.
- ✓ Аппараты поставляются с предустановленной кассетой.
- ✓ Стерильные медицинские изделия для однократного применения.

Размерный ряд

REF аппарата	Цвет и REF совместимых кассет	Высота открытой скобы кассеты, мм		Высота закрытой скобы, мм	Длина шва, мм	Кол-во рядов скоб	Упаковка (инд./тр.)
		предустановленной	отдельно поставляемой				
1847-VLC-B60-B	■ 1847-VLSC60B-B	3,8	3,8	1,5	60	4	1/3
1847-VLC-G60-B	■ 1847-VLSC60G-B	4,5	4,5	2,0			
1847-VLC-B80-B	■ 1847-VLSC80B-B	3,8	3,8	1,5	80	4	1/3
1847-VLC-G80-B	■ 1847-VLSC80G-B	4,5	4,5	2,0			
1847-VLC-B100-B	■ 1847-VLSC100B-B	3,8	3,8	1,5	100	4	1/3
1847-VLC-G100-B	■ 1847-VLSC100G-B	4,5	4,5	2,0			



АППАРАТЫ СШИВАЮЩИЕ ЦИРКУЛЯРНЫЕ



Применяются для наложения механического шва, разреза и создания анастомозов: «конец в бок» и «конец в конец». Аппараты сшивающие циркулярные формируют замкнутый шов в виде круга. В головку интегрирован нож для одновременной резекции ткани во время процедуры.

- ✓ Два варианта исполнения штока (стандартный, удлиненный) подходят для создания анастомоза с разной локализацией ткани, позволяя совершать прошивание с максимальной эффективностью выполняемых манипуляций.
- ✓ Удлиненный сшивающий аппарат подходит для операций, требующих большей длины рабочей части, позволяя совершать прошивание на пищеводе.
- ✓ На рукоятке расположен индикатор регулирования величины зазора скоб, который помогает регулировать силу компрессии ткани, обеспечивая максимальную эффективность процедуры.
- ✓ Изогнутый ствол циркулярных сшивающих аппаратов повторяет анатомический изгиб кишки, облегчая проведение изделия в зону анастомоза.
- ✓ Предохранитель, расположенный под рукояткой сшивающего аппарата, исключает риск непреднамеренного прошивания, позволяя безопасно проводить манипуляции.
- ✓ Стерильные медицинские изделия для однократного применения.


Размерный ряд аппаратов сшивающих циркулярных стандартных

REF	Диаметр рабочей части, мм	Цветовая кодировка магазина со скобами	Тип головки	Высота скоб до прошивания, мм	Кол-во рядов скоб	Размеры зазоров прошивания, мм	Упаковка (инд./тр.)
1847-VC21-B	21	синий	округлая	5	2	1,0 — 2,0	1/3
1847-VC25-B	25	синий	округлая	5	2	1,0 — 2,3	1/3
1847-VC29-B	29	зелёный	округлая	5	2	1,0 — 2,3	1/3
1847-VC32-B	32	белый	округлая	5	2	1,0 — 2,3	1/3
1847-VC34-B	34	серый	округлая	5	2	1,0 — 2,3	1/3
1847-VC25A	25	белый	коническая	5	2	1,0 — 2,3	1/3



Размерный ряд аппаратов сшивающих циркулярных удлинённых

REF	Диаметр рабочей части, мм	Цветовая кодировка магазина со скобами	Высота скоб до прошивания, мм	Кол-во рядов скоб	Размеры зазоров прошивания, мм	Упаковка (инд./тр.)
1847-VC25L	25	белый	5	2	1,0 — 2,3	1/3
1847-VC28L	28	синий	5	2	1,0 — 2,3	1/3
1847-VC32L	32	зелёный	5	2	1,0 — 2,3	1/3

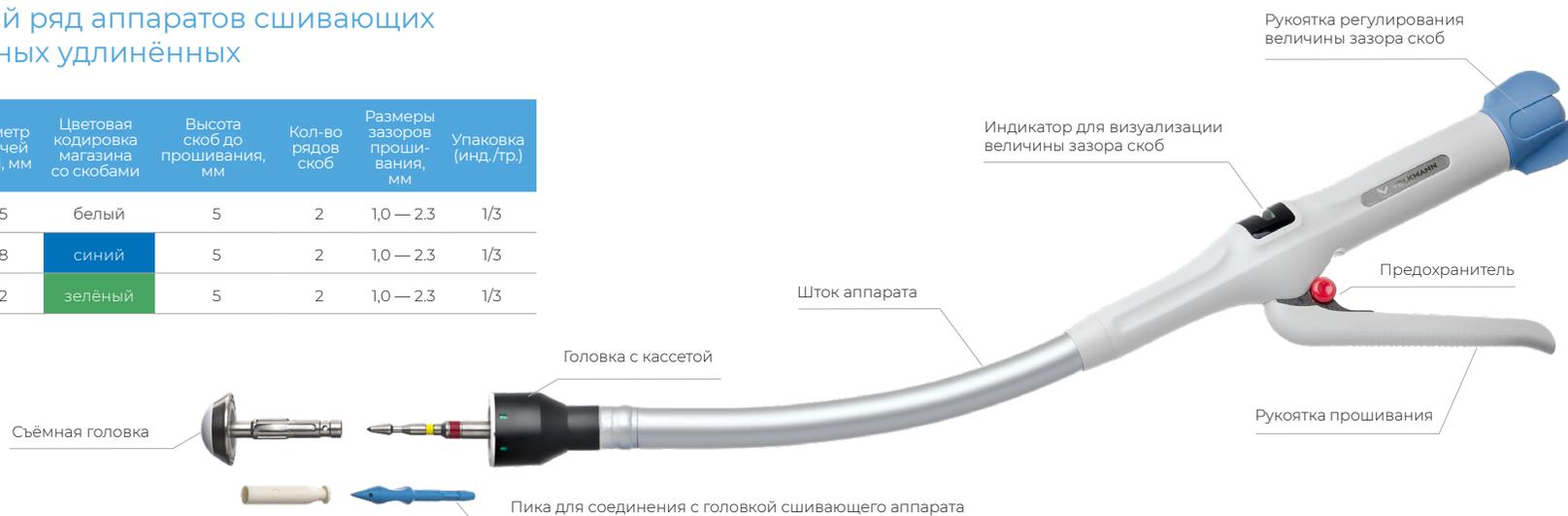



АльфаМедЭкс