

Сфокусируйтесь на здоровье  
пациентов – с остальным поможет



# КОРЗИНЫ- ЭКСТРАКТОРЫ



ALFAMEDEX.RU

КАТАЛОГ

# КОРЗИНЫ-ЭКСТРАКТОРЫ

Предназначены для захвата, удержания и извлечения камней из мочевыводящих путей (мочеточника, почки), а также для улавливания мелких фрагментов после литотрипсии.

✓ Материал изготовления корзин – нитинол, снижает риски повреждения слизистых благодаря:


- гибкости и эластичности;
- высокой устойчивостью к перекручиванию и изгибам.

✓ Конструкция корзин из 3-х или 4-х тонких нитей, обеспечивает надежное удерживание камня со всех сторон, минимизируя риск выскальзывания во время извлечения.





## КОРЗИНЫ-ЭКСТРАКТОРЫ ДЛЯ УДАЛЕНИЯ КАМНЕЙ BLUELINE, БЕЗ НАКОНЕЧНИКА

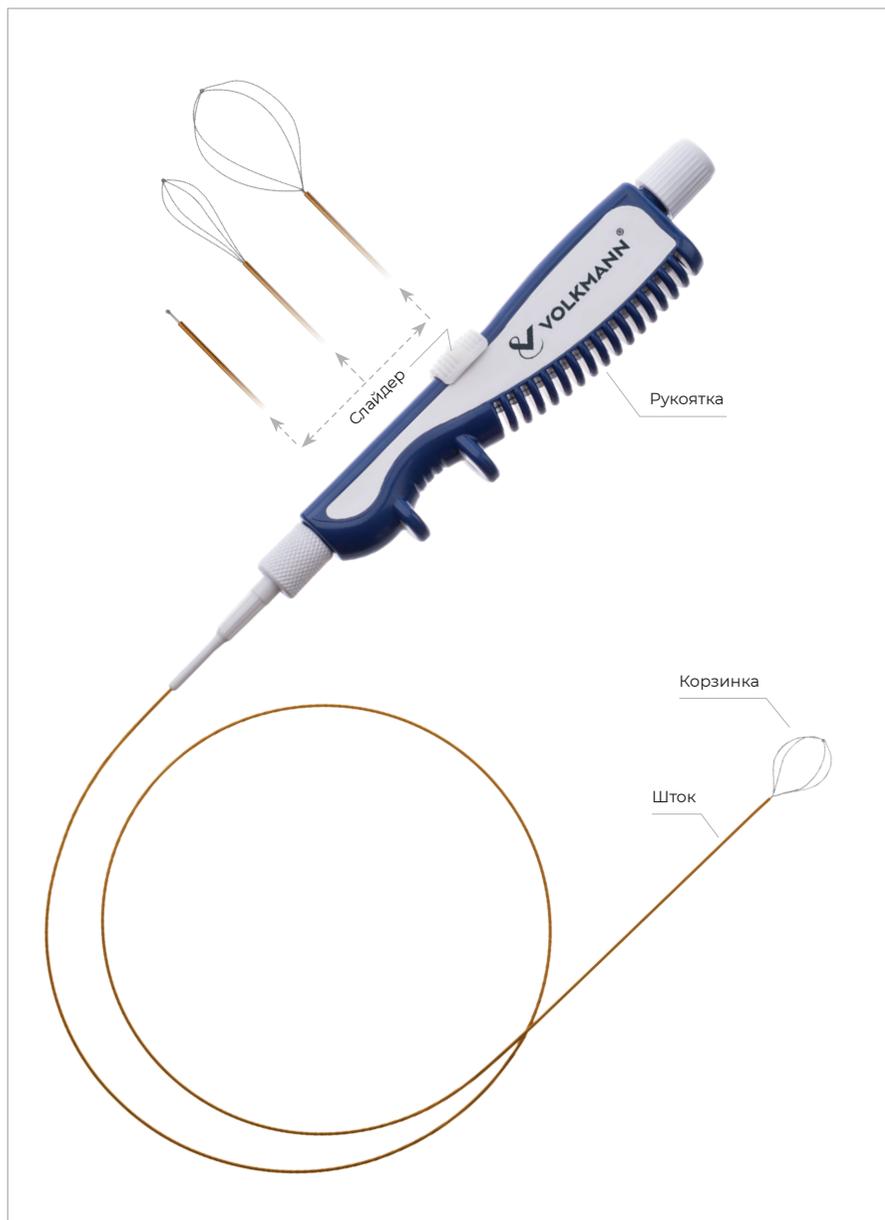


Предназначены для захвата и извлечения фрагментов камня или камня из почек и мочеточников в ходе эндоскопической процедуры РИРХ.

- ✓ Конструкция корзины обеспечивает:
  - полное и контролируемое раскрытие корзины для надежного захвата конкрементов диаметром от 6 мм до 12 мм;
  - возможность бокового и верхнего захвата сложных, вклиненных и крупных камней.
- ✓ Безопасное извлечение за счет конструкции без наконечника:
  - позволяет подвести корзину вплотную к поверхности камня;
  - обеспечивает свободное скольжение кончика по стенкам мочеточника и лоханки, минимизируя риск перфорации.
- ✓ Нити с круглым сечением мягко соприкасаются со слизистой оболочкой, предотвращая ее повреждение и врезание.
- ✓ Гибкий шток сохраняет управляемость даже при сильном изгибе кончика эндоскопа.
- ✓ Эргономичная слайдерная рукоятка с плавным ходом ползунка обеспечивает высокую точность и полный контроль при открытии/закрытии корзины во время манипуляции.

REF	Количество нитей	Внешний диаметр штока, Fr	Внешний диаметр штока, мм	Длина штока, см	Размеры корзины (длина x диаметр), мм	Упаковка (инд./гр./тр.)
SB-N4H1(8)120-B	4	1,8	0,6	120	15,6 x 12	1/40/80

## КОРЗИНЫ-ЭКСТРАКТОРЫ ДЛЯ УДАЛЕНИЯ КАМНЕЙ PERC, БЕЗ НАКОНЕЧНИКА

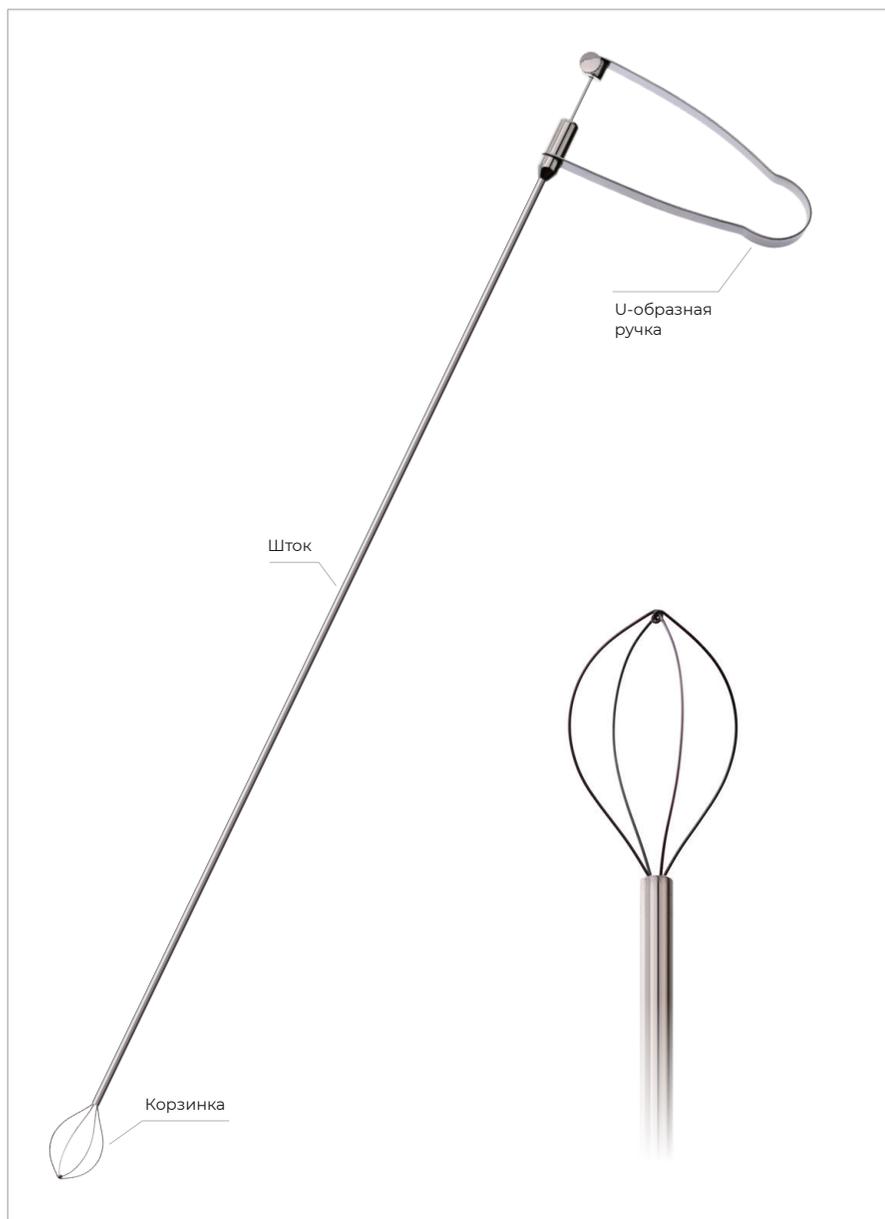

Предназначены для захвата и извлечения камней из почек в ходе перкутанной нефролитотрипсии (ПНЛ).

✓ Конструкция корзины обеспечивает:

- полное и контролируемое раскрытие корзины для надежного захвата конкрементов диаметром от 6 мм до 12 мм;
- возможность бокового и верхнего захвата сложных, вклиненных и крупных камней.

✓ Безопасное извлечение за счет конструкции без наконечника:

- позволяет подвести корзину вплотную к поверхности камня;
- обеспечивает свободное скольжение кончика по стенкам лоханки, минимизируя риск перфорации;
- нити с круглым сечением мягко соприкасаются с внутренними тканями, предотвращая повреждение их и врезание.


✓ Шток диаметром 6 Fr (Ch) обеспечивает отличную совместимость с современными тонкими нефроскопами, не ограничивая ирригационный поток.

✓ Оптимальная длина штока 40 см рассчитана для комфортной и безопасной работы через стандартный нефроскоп при чрескожном доступе.

REF	Количество нитей	Внешний диаметр штока, Fr	Внешний диаметр штока, мм	Длина штока, см	Размеры корзины (длина x диаметр), мм	Упаковка (инд./гр./тр.)
SB-N4H640-B	4	6	2	40	23 x 17	1/5/60



## КОРЗИНЫ-ЭКСТРАКТОРЫ ДЛЯ УДАЛЕНИЯ КАМНЕЙ PERC, ОТКРЫТЫЕ

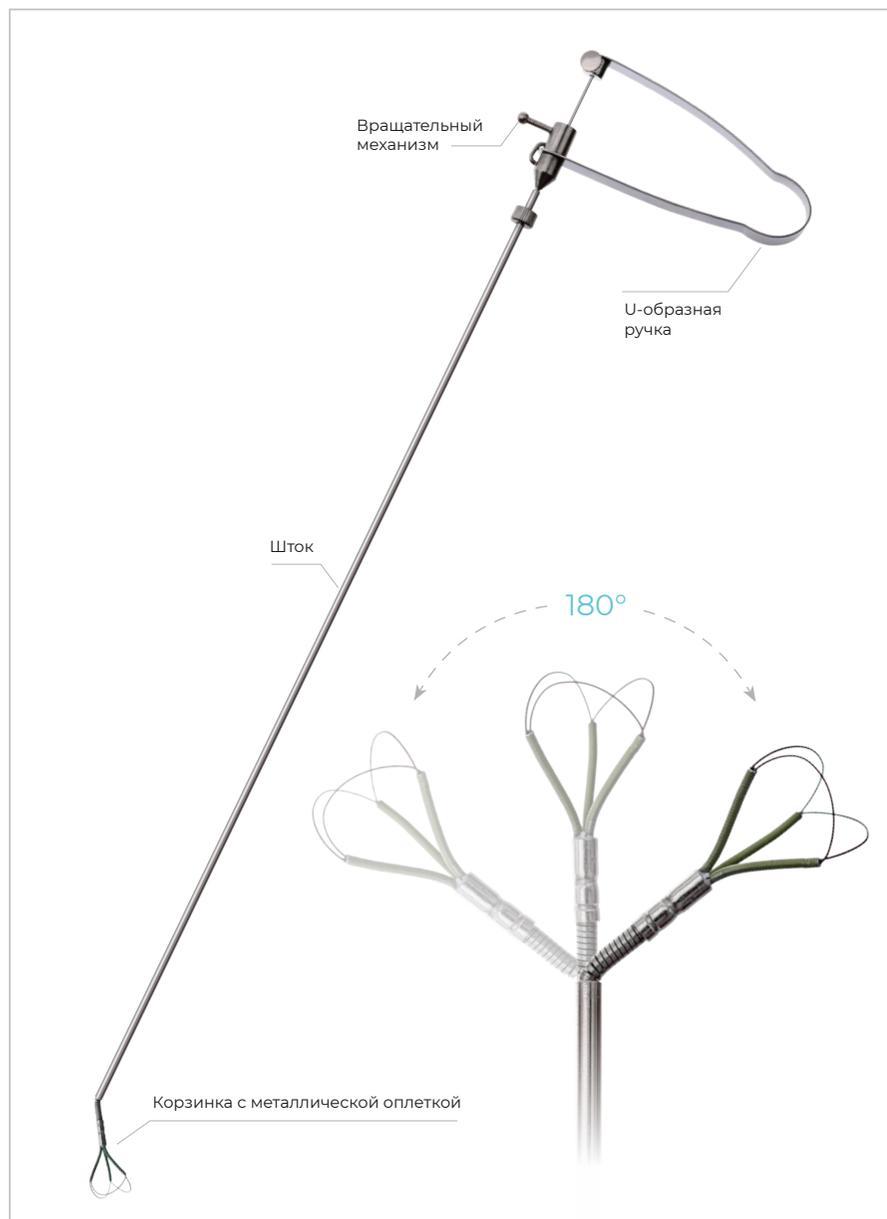

Предназначены для захвата и извлечения фрагментов камня или самого камня из почек в ходе перкутанной нефролитотрипсии (ПНЛ).

- ✓ Торцевой захват корзины, позволяет произвести атравматичное и безопасное удаление камня за счет:
  - возможности извлечения камней без предварительного дробления;
  - уникальной конфигурации, позволяющей захватывать конкременты снизу, без необходимости проталкивания корзины за камень;
  - фиксации камней от 1 мм и более.
- ✓ Механизм вращения корзины на 180° позволяет повернуть её в оптимальное положение для эффективного захвата камней в анатомически сложных и труднодоступных участках почки;
- ✓ Шток диаметром 7 Fr (Ch) обеспечивает отличную совместимость с современными тонкими нефроскопами, не ограничивая ирригационный поток.
- ✓ Оптимальная длина штока 40 см рассчитана для комфортной и безопасной работы через стандартный нефроскоп при чрескожном доступе.

REF	Количество нитей	Внешний диаметр штока, Fr	Внешний диаметр штока, мм	Длина штока, см	Размеры корзины (длина x диаметр), мм	Упаковка (инд./гр./гр.)
SB-EN740-B	3	7	2,33	40	14 x 12,5	1/5/60



АльфаМедЭкс