

Сфокусируйтесь на здоровье
пациентов – с остальным поможет




НАБОРЫ ДЛЯ НАДЛОБКОВОЙ ЦИСТОСТОМИИ



ALFAMEDEX.RU

КАТАЛОГ

НАБОРЫ ДЛЯ НАДЛОБКОВОЙ ЦИСТОСТОМИИ

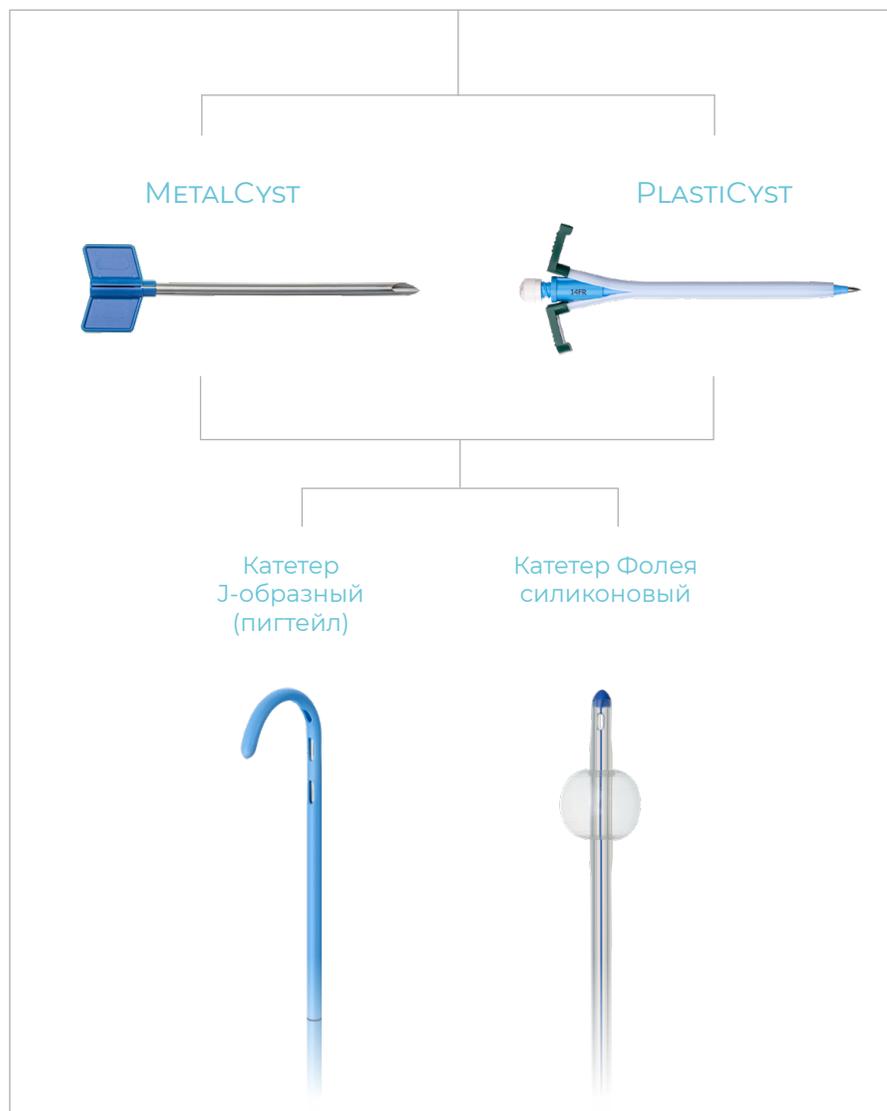

Предназначены для временного или постоянного дренирования мочевого пузыря через катетер, установленный в надлобковой области (цистостому), методом надлобковой пункции.

- ✓ Полная комплектация наборов для надлобковой цистостомии обеспечивает ускоренный процесс установки катетера и повышает уровень рабочего комфорта для специалиста.
- ✓ Наличие скальпеля в наборе позволяет делать небольшой надрез во время манипуляции с целью облегчения прохождения катетера.
- ✓ В зависимости от вида цистостомы представлены все вариации катетеров:

Катетер J-образный (пигтейл):


- материал изготовления — полиуретан, биосовместимый с внутренней средой организма, позволяет устанавливать изделие до 90 дней;
- внутренний просвет катетера максимально соответствует внешнему диаметру изделия, что позволяет лучше отводить мочу с патологическими примесями.

Катетеры Фолея:

- материал изготовления — силикон, снижает риски раздражения тканей, обеспечивает низкую скорость инкрустации и образования биоплёнок на изделии;
- баллон, расположенный на дистальном конце катетера, раздувается при помощи шприца для надёжной фиксации в мочевом пузыре.



НАБОРЫ ДЛЯ НАДЛОБКОВОЙ ЦИСТОСТОМИИ METALCYST

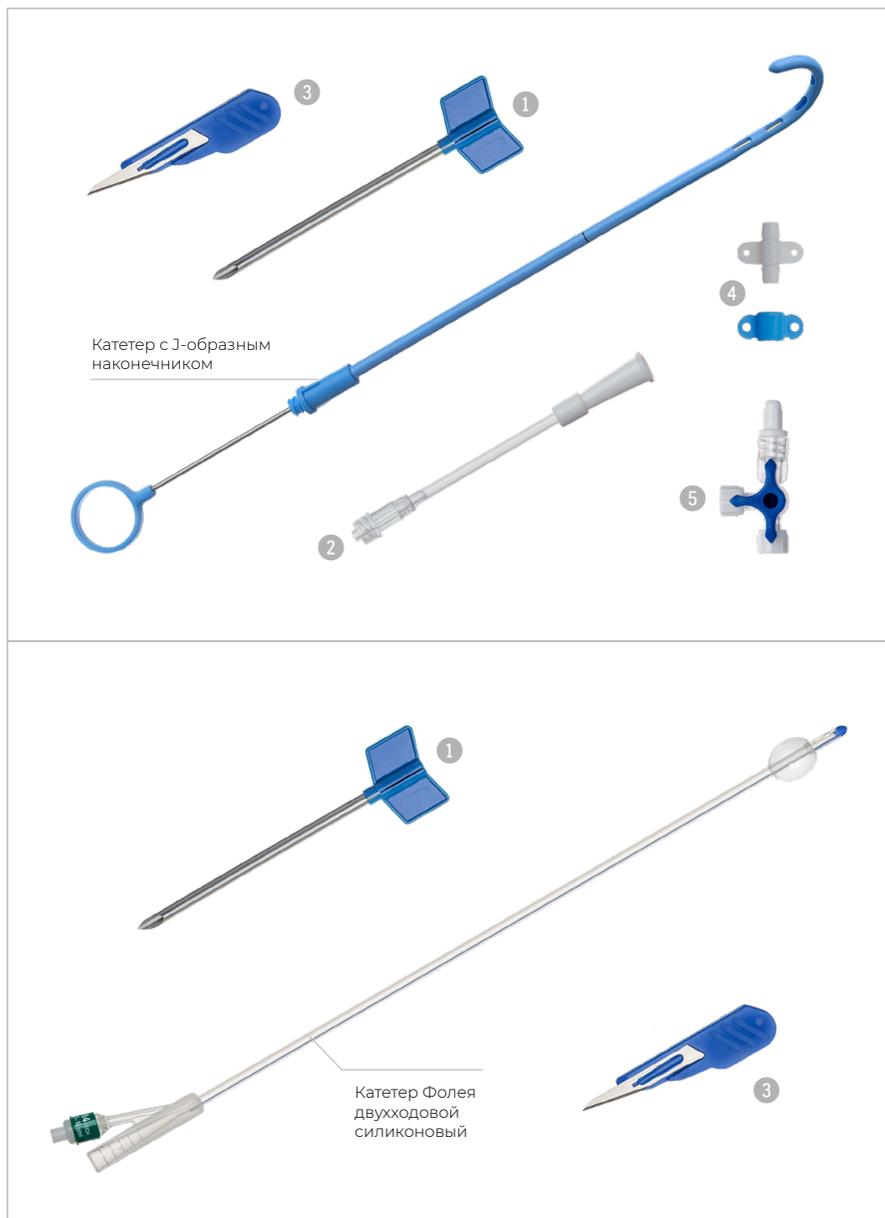

Предназначены для быстрой установки цистостомы в экстренной ситуации.

- Троакар-канюля изготовлена из нержавеющей стали с острой заточкой для эффективного доступа к мочевому пузырю даже в случае плотных кожных покровов.

Состав наборов

Тип урологического катетера	Катетер с J-образным наконечником	Катетер Фолея двухходовой силиконовый
1. Троакар-канюля расщепляющаяся	✓	✓
2. Коннектор для мочеприёмника	✓	—
3. Скальпель	✓	✓
4. Фиксирующая муфта	✓	—
5. Трёхходовой краник	✓	—

Размер катетера, Ch/Fr	Катетер с J-образным наконечником	Катетер Фолея двухходовой силиконовый	Упаковка (инд./гр./тр.)
8	—	—	
10	CYS-10-J-12	CYS-10-SF-12	1/-/10
12	CYS-12-J-12	CYS-12-SF-12	
14	CYS-14-J-12	CYS-14-SF-12	

НАБОРЫ ДЛЯ НАДЛОБКОВОЙ ЦИСТОСТОМИИ PLASTICYST



Изделия предназначены для безопасной установки надлобкового мочевого дренажа:

- пластиковая оболочка хорошо удерживает рабочий канал при выполнении цистостомии;
- расширитель с металлическим троакаром бережно прокалывает и расширяет ткани во время прокола.

✓ Пирамидальная заточка троакара легко и атравматично проникает внутрь мочевого пузыря.

✓ Пластиковая троакар-канюля имеет широкий просвет, что позволяет первично устанавливать катетеры большого диаметра в случае клинической необходимости.

Состав наборов

Тип урологического катетера	Катетер с J-образным наконечником	Катетер Фолея двухходовой силиконовый
1. Троакар-канюля расщепляющаяся	✓	✓
2. Коннектор для мочеприёмника	✓	—
3. Скальпель	✓	✓
4. Фиксирующая муфта	✓	—
5. Трёхходовой краник	✓	—

Размер катетера, Ch/Fr	Катетер с J-образным наконечником	Катетер Фолея двухходовой силиконовый	Упаковка (инд./гр./тр.)
10	CYST-10-J	CYST-10-SF	
12	CYST-12-J	CYST-12-SF	
14	CYST-14-J	CYST-14-SF	1/-/10
16		CYST-16-SF	
18		CYST-18-SF	



АльфаМедЭкс