

Сфокусируйтесь на здоровье
пациентов – с остальным поможет



АППАРАТЫ ИВЛ РУЧНЫЕ



ALFAMEDEX.RU

КАТАЛОГ



АППАРАТЫ ИВЛ РУЧНЫЕ



Используются для лёгочной реанимации и помощи при проведении ручной искусственной вентиляции лёгких с целью поддержания нормального дыхания пациента в течение короткого времени.

- ✓ Комплектация резервуарным мешком и магистралью для обеспечения возможности подключения аппарата ИВЛ к внешнему источнику кислорода.
- ✓ Клапан ограничения давления для снижения риска нанесения баротравмы лёгких.

- ✓ Клапан пациента типа «Утконос» для разделения воздушных потоков и обеспечения обмена газовой смеси внутри дыхательного мешка с окружающей средой.
- ✓ Текстурированная поверхность дыхательного мешка для исключения скольжения в руках медицинского персонала.
- ✓ Вертлужный коннектор с осью вращения на 360° для обеспечения мобильности дыхательного мешка.
- ✓ Упаковка мешка и комплектующих в пластиковый бокс для удобной переноски и хранения изделия.

Аппараты ИВЛ ручные


Из ПВХ



Из силикона



АППАРАТЫ ИСКУССТВЕННОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ ЛЁГКИХ РУЧНЫЕ ИЗ ПВХ

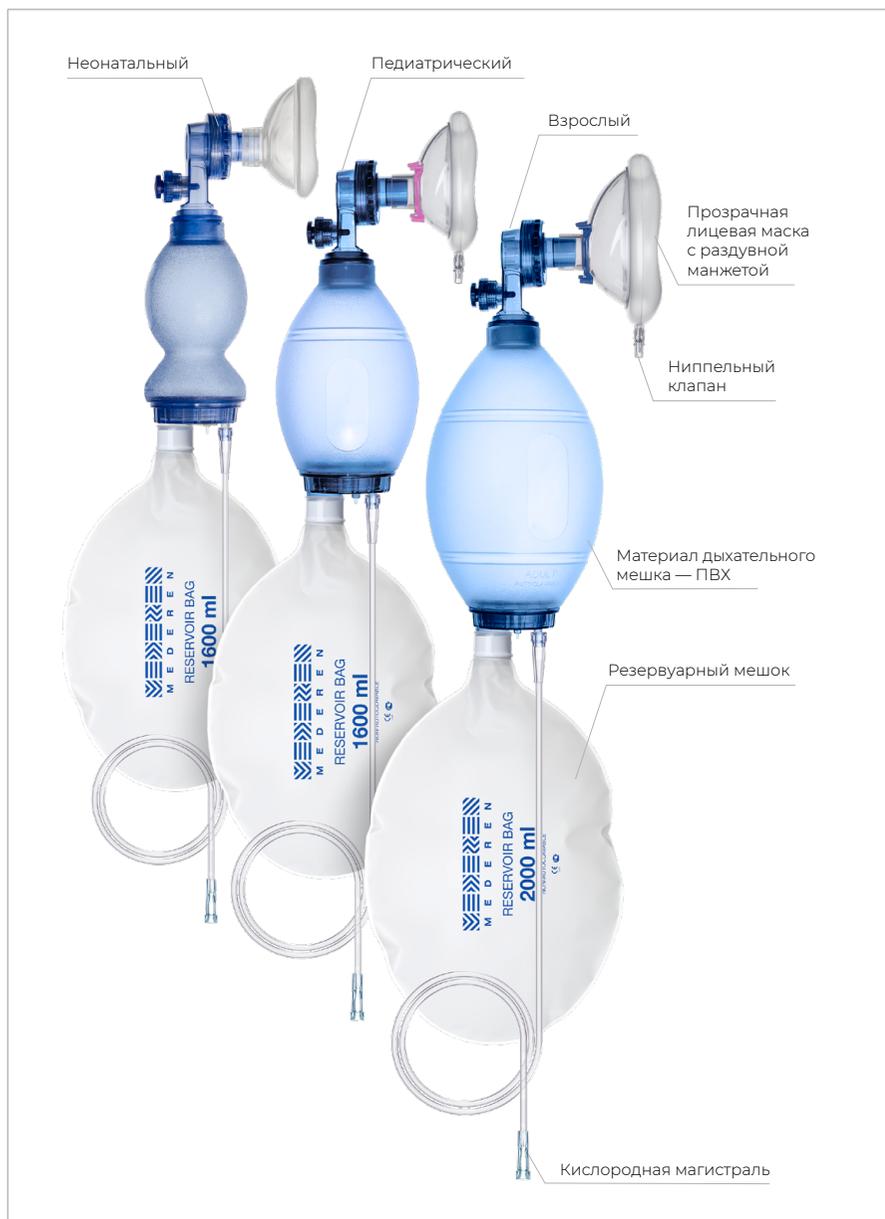

- ✓ Аппараты ИВЛ, выполненные из ПВХ (поливинилхлорида), предназначены для одноразового использования, снижают риск перекрёстного заражения.
- ✓ Прозрачная лицевая маска служит для контроля за состоянием кожных покровов носогубного треугольника пациента.
- ✓ Маска с раздувной манжетой и ниппельным клапаном с разъемом Luer обеспечивает герметичное прилегание изделия к лицу пациента.

Размерный ряд

REF	Размер маски	Вид мешка	Объем мешка, мл	Упаковка (инд./гр./гр.)
0125-M820-01	0	Неонатальный	280	1/-/12
0125-M820-02	1	Педиатрический	600	1/-/12
0125-M820-03	2	Педиатрический	600	1/-/12
0125-M820-04	3 (S)	Взрослый	1650	1/-/12
0125-M820-05	4 (M)	Взрослый	1650	1/-/12
0125-M820-06	5 (L)	Взрослый	1650	1/-/12
0125-M820-07	6 (XL)	Взрослый	1650	1/-/12



АППАРАТЫ ИСКУССТВЕННОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ ЛЁГКИХ РУЧНЫЕ ИЗ СИЛИКОНА



- ✓ Материал изготовления мешка и маски — медицинский силикон, подлежащий автоклавированию, для обеспечения многократного использования изделия.
- ✓ Прозрачная лицевая маска для контроля за состоянием кожных покровов носогубного треугольника пациента.

Размерный ряд

REF	Размер маски	Вид мешка	Объём мешка, мл	Упаковка (инд./гр./гр.)
0125-M810-01	0	Неонатальный	280	1/-/12
0125-M810-02	1	Педиатрический	600	1/-/12
0125-M810-03	2	Педиатрический	600	1/-/12
0125-M810-04	3 (S)	Взрослый	1650	1/-/12
0125-M810-05	4 (M)	Взрослый	1650	1/-/12
0125-M810-06	5 (L)	Взрослый	1650	1/-/12
0125-M810-07	6 (XL)	Взрослый	1650	1/-/12



АльфаМедЭкс