

Сфокусируйтесь на здоровье
пациентов – с остальным поможет



НАБОРЫ ДЛЯ ПЕРКУТАННОЙ НЕФРОСТОМИИ



ALFAMEDEX.RU

КАТАЛОГ

НАБОРЫ ДЛЯ ПЕРКУТАННОЙ НЕФРОСТОМИИ



Предназначены для восстановления оттока мочи из верхних мочевыводящих путей через прокол в проекции почки, с установкой нефростомического катетера в полстную систему почки.

Катетеры нефростомические:

- J-образный кончик с памятью формы — самофиксируется в чашечно-лоханочной системе почки;
- гидрофильное покрытие улучшает скользящие свойства изделия для его атравматичного введения.

- ✓ Материал катетера нефростомического — рентгеноконтрастный полиуретан, для рентген-контроля положения катетера.

- ✓ Градуировочные линии вдоль катетера служат для дополнительного визуального контроля глубины введения.

- ✓ Фиксирующая муфта в комплекте — для удобной фиксации на коже внешней части нефростомического катетера.


- ✓ Скальпель № 11 с лезвием из нержавеющей стали используется для выполнения надреза во время манипуляции.

- ✓ Благодаря трёхходовому кранику мешок-мочеприёмник присоединяется по принципу «закрытой системы». Это позволяет заменять мочеприёмник без контакта с окружающей средой, вводить лекарственные средства или выполнять забор проб мочи без отсоединения мешка-мочеприёмника.





НАБОРЫ ДЛЯ ПЕРКУТАННОЙ НЕФРОСТОМИИ МНОГОШАГОВЫЕ

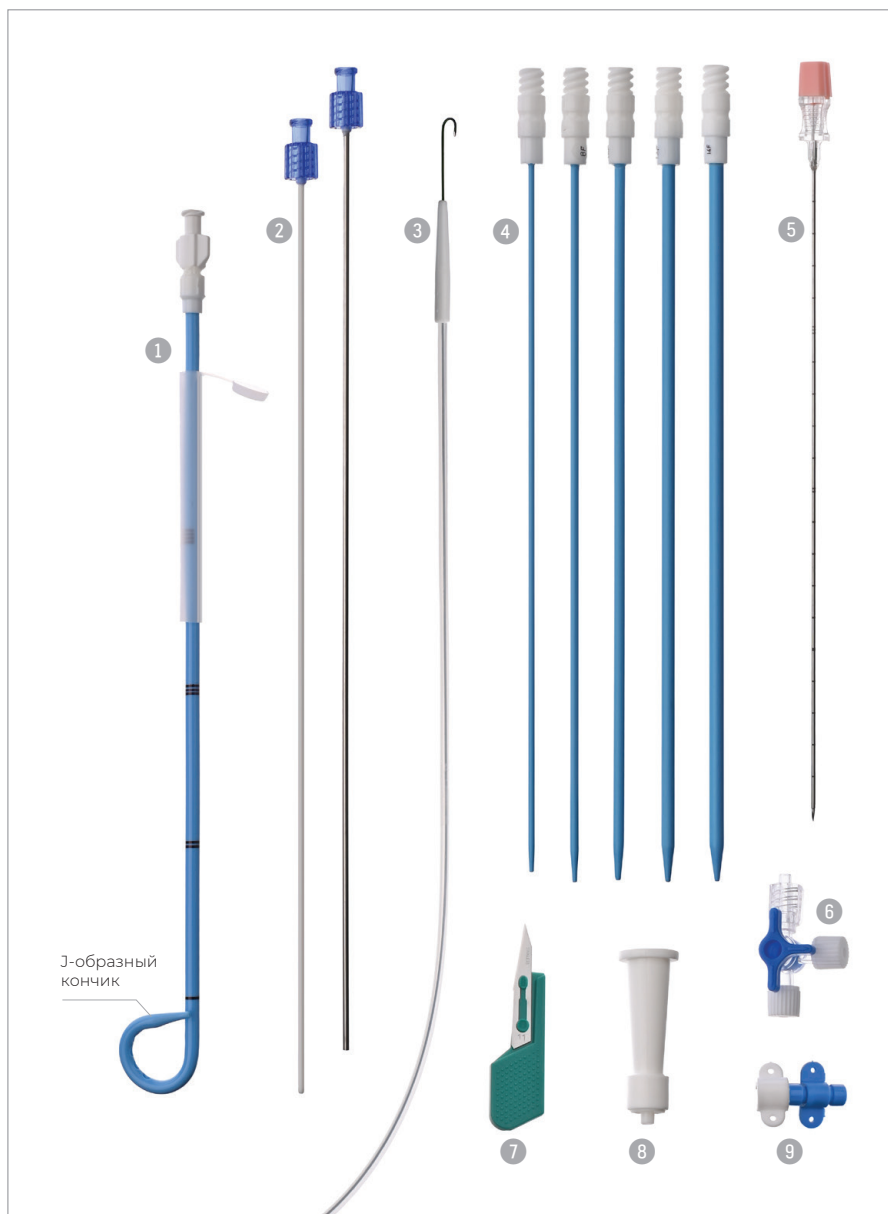

☑ Катетеры нефростомические:

- J-образный кончик для лучшей фиксации трубки в чашечно-лоханочной системе почки;
- гидрофильное покрытие улучшает скользящие свойства изделия для его атравматичного введения.

☑ Иглы пункционная и Чива:

- экзогенный кончик иглы позволяет осуществлять дополнительный контроль процесса пункции под ультразвуком.

☑ Фасциальные дилататоры:

- рентгеноконтрастный полиуретан для рентген-контроля этапа расширения нефростомического канала;
- конусообразный дистальный кончик для безопасного раздвигания тканей и атравматичного расширения канала.


☑ Струны-проводники:

- ПТФЭ-покрытие снижает силу трения и позволяет проводить струну-проводник с минимальным повреждением тканей и слизистых;
- J-образный дистальный конец струны дополнительно фиксирует струну в полостной системе почки.

Комплектация

- | | |
|--|---------------------------------|
| 1. Катетер нефростомический с J-образным наконечником. | 5. Игла Чива. |
| 2. Выпрямитель. | 6. Трёхходовой краник. |
| 3. Струна-проводник «Лундерквист». | 7. Скальпель № 11. |
| 4. Фасциальные дилататоры. | 8. Коннектор для мочеприёмника. |
| | 9. Фиксирующая муфта. |

НАБОРЫ ДЛЯ ПЕРКУТАННОЙ НЕФРОСТОМИИ ОДНОШАГОВЫЕ

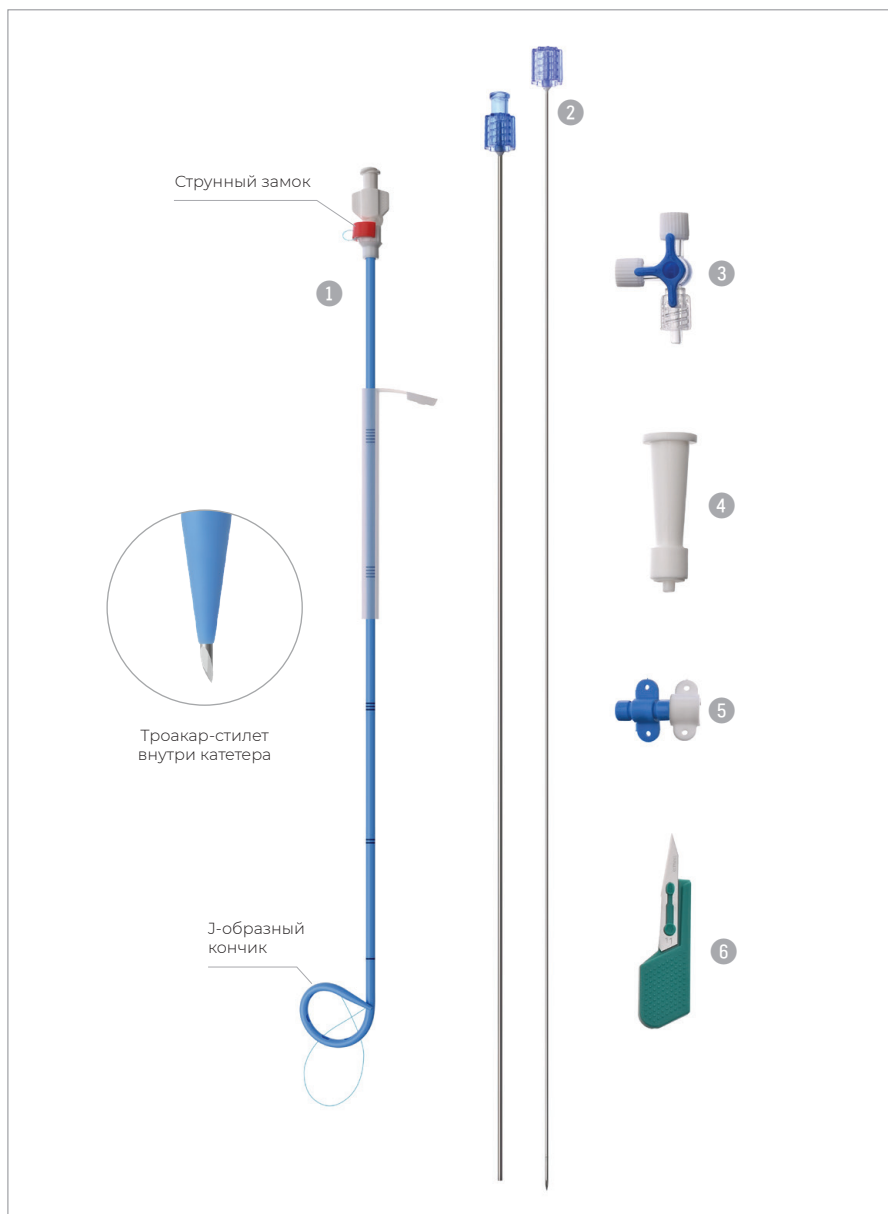

Предназначены для выполнения нефростомии методом одношаговой техники.

- ✓ Троакар-стилет внутри нефростомического катетера позволяет делать прокол, проводить пункцию, дилатацию и установку изделия в один этап.

Комплектация

1. Катетер нефростомический с J-образным наконечником и струнным замком.
2. Троакар металлический.
3. Трёхходовой краник.
4. Коннектор для мочеприёмника.
5. Фиксирующая муфта.
6. Скальпель № 11.



НАБОРЫ ДЛЯ ПЕРКУТАННОЙ НЕФРОСТОМИИ СМЕННЫЕ




Предназначены для плановой замены установленного нефростомического катетера на новый в уже сформированной нефростоме.

- ✓ Комплектация набора включает всё самое необходимое для плановой замены нефростомического катетера и является экономичной модификацией набора для перкутанной нефростомии.

Комплектация


1. Катетер нефростомический.
2. Выпрямитель.
3. Коннектор для мочеприёмника.
4. Краник трёхходовой.
5. Фиксирующая муфта.
6. Скальпель № 11.

Размерный ряд наборов для перкутанной нефростомии многошаговой

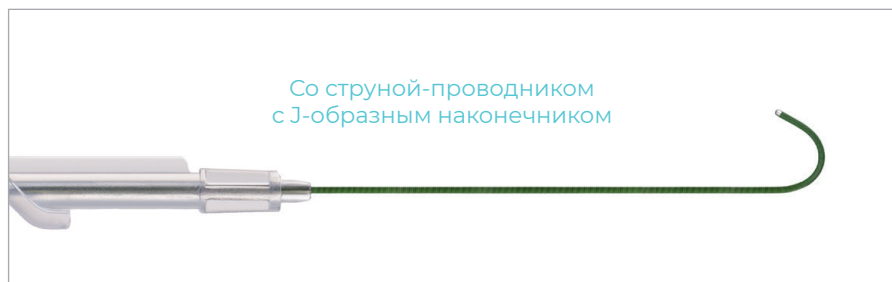

Катетер с J-образным кончиком


Размер катетера, Fr/Ch	· с гидрофильным покрытием; · со струнным замком	Упаковка (инд./гр./тр.)
8	PHS-0830-JGW	1/-/10

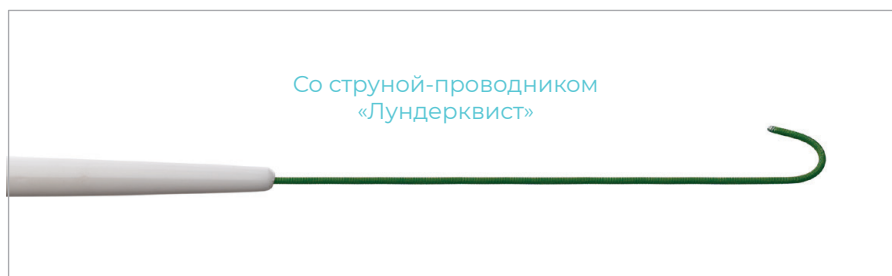

Катетер с J-образным кончиком


Размер катетера, Fr/Ch	· без гидрофильного покрытия	· с гидрофильным покрытием; · со струнным замком	Упаковка (инд./гр./тр.)
8	BP-0830-LGW	BPSH-0835-LGW	1/20/60
10	BP-1030-LGW	BPSH-1035-LGW	1/20/60
12	BP-1230-LGW	—	1/20/60

Размерный ряд наборов для перкутанной нефростомии одношаговой

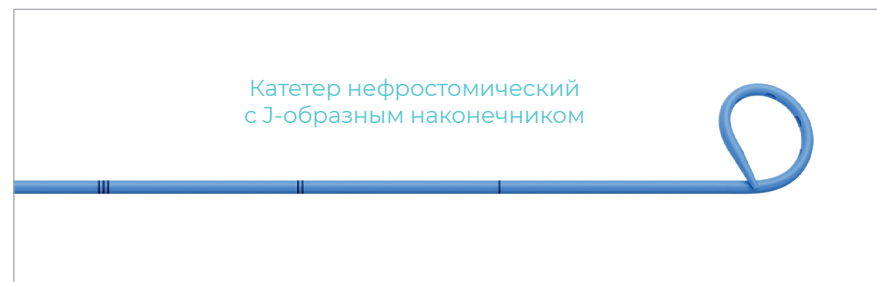

Размер катетера, Fr/Ch	· без гидрофильного покрытия	· без гидрофильного покрытия; · со струнным замком	Упаковка (инд./гр./тр.)	
			P...	BP...
8	P-0830-OS BP-0830-OS	BPS-0835-OS	1/-/10	1/80/320
10	BP-1030-OS	BPS-1035-OS		

Размерный ряд наборов для перкутанной нефростомии сменные

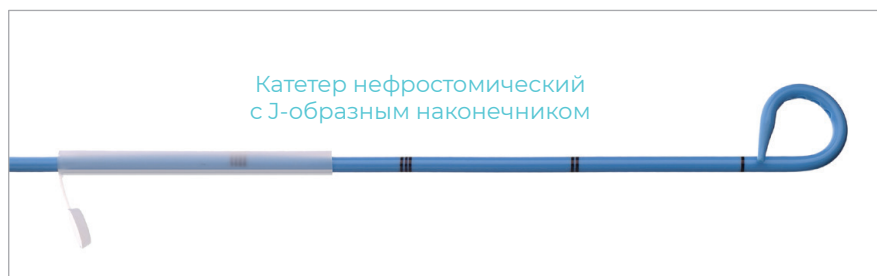

Размер катетера, Fr/Ch	· без гидрофильного покрытия	· с гидрофильным покрытием	Упаковка (инд./гр./тр.)
10	—	BPH-1030-R	1/80/320
12	BP-1230-R	—	1/80/320
14	BP-1430-R	—	1/80/320





АльфаМедЭкс