

Сфокусируйтесь на здоровье
пациентов – с остальным поможет



НАБОРЫ ДЛЯ ПЕРКУТАННОЙ НЕФРОСТОМИИ



ALFAMEDEX.RU

КАТАЛОГ



НАБОРЫ ДЛЯ ПЕРКУТАННОЙ НЕФРОСТОМИИ



Предназначены для восстановления оттока мочи из верхних мочевыводящих путей через прокол в проекции почки, с установкой нефростомического катетера в полстную систему почки.

Катетеры нефростомические:

- J-образный кончик с памятью формы — самофиксируется в чашечно-лоханочной системе почки;
- гидрофильное покрытие улучшает скользящие свойства изделия для его атравматичного введения.

- ✓ Материал катетера нефростомического — рентгеноконтрастный полиуретан, для рентген-контроля положения катетера.

- ✓ Градуировочные линии вдоль катетера служат для дополнительного визуального контроля глубины введения.

- ✓ Фиксирующая муфта в комплекте — для удобной фиксации на коже внешней части нефростомического катетера.

- ✓ Скальпель № 11 с лезвием из нержавеющей стали используется для выполнения надреза во время манипуляции.

- ✓ Благодаря трёхходовому кранику мешок-мочеприёмник присоединяется по принципу «закрытой системы». Это позволяет заменять мочеприёмник без контакта с окружающей средой, вводить лекарственные средства или выполнять забор проб мочи без отсоединения мешка-мочеприёмника.

Катетеры нефростомические



НАБОРЫ ДЛЯ ПЕРКУТАННОЙ НЕФРОСТОМИИ МНОГОШАГОВЫЕ



✓ Катетеры нефростомические:

- J-образный кончик для лучшей фиксации трубки в чашечно-лоханочной системе почки;
- гидрофильное покрытие улучшает скользящие свойства изделия для его атравматичного введения.

✓ Иглы пункционная и Чибя:

- экзогенный кончик иглы позволяет осуществлять дополнительный контроль процесса пункции под ультразвуком.

✓ Фасциальные дилататоры:

- рентгеноконтрастный полиуретан для рентген-контроля этапа расширения нефростомического канала;
- конусообразный дистальный кончик для безопасного раздвигания тканей и атравматичного расширения канала.

✓ Струны-проводники:


- различная степень жёсткости позволяет подбирать специалисту эргономичное решение и проводить процедуру нефростомии удобно и безопасно;
- ПТФЭ-покрытие снижает силу трения и позволяет проводить струну-проводник с минимальным повреждением тканей и слизистых;
- J-образный дистальный конец струны дополнительно фиксирует струну в полостной системе почки.

Комплектация

1. Нефростома с J-образным наконечником.	6. Коннектор для мочеприёмника.
2. Игла Чибя 22G.	7. Скальпель № 11.
3. Игла пункционная 18G.	8. Трёхходовой краник.
4. Фасциальные дилататоры.	9. Струна-проводник с J-образным наконечником или «Лундерквист».
5. Фиксирующая муфта.	



НАБОРЫ ДЛЯ ПЕРКУТАННОЙ НЕФРОСТОМИИ ОДНОШАГОВЫЕ

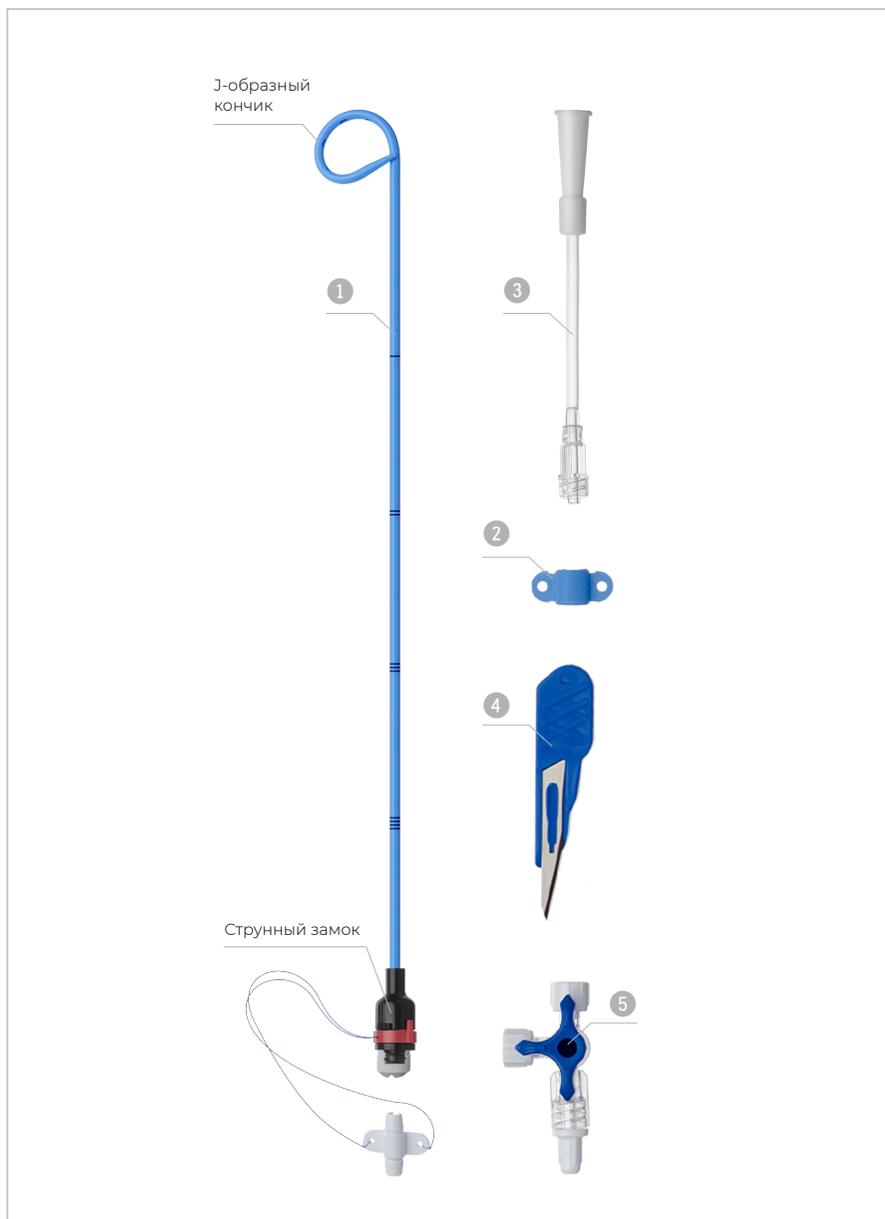

Предназначены для выполнения нефростомии методом одношаговой техники.

- ☑ Троякар-стилет внутри нефростомического катетера позволяет делать прокол, проводить пункцию, дилатацию и установку изделия в один этап.

Комплектация

1. Нефростома с J-образным наконечником.
2. Фиксирующая муфта.
3. Коннектор для мочеприёмника.
4. Скальпель № 11.
5. Трёхходовой краник.

НАБОРЫ ДЛЯ ПЕРКУТАННОЙ НЕФРОСТОМИИ СМЕННЫЕ



Предназначены для плановой замены установленного нефростомического катетера на новый в уже сформированной нефростоме.


- ✓ Комплектация набора включает всё самое необходимое для плановой замены нефростомического катетера и является экономичной модификацией набора для перкутанной нефростомии.

Комплектация

1. Катетер нефростомический.
2. Выпрямитель.
3. Коннектор для мочеприёмника.
4. Краник трёхходовой.
5. Фиксирующая муфта.
6. Скальпель № 11.



Размерный ряд наборов для перкутанной нефростомии многошаговой

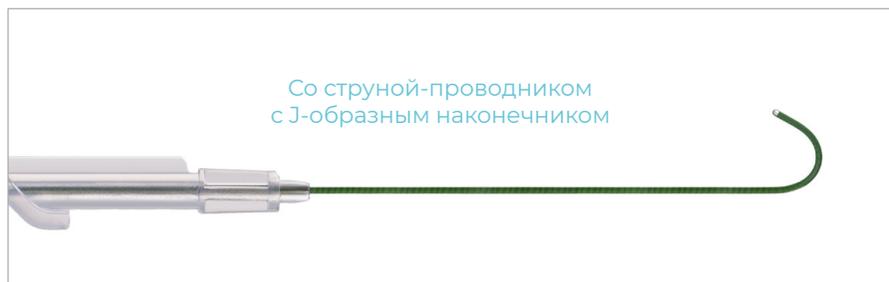

Катетер с J-образным кончиком


Размер катетера, Fr/Ch	· без гидрофильного покрытия	· без гидрофильного покрытия; · со струнным замком	· с гидрофильным покрытием; · со струнным замком	Упаковка (инд./гр./гр.)
6	P-0630-JGW	—	—	1/-/10
8	P-0830-JGW	PS-0830-JGW	PHS-0830-JGW	1/-/10
10	P-1030-JGW	PS-1030-JGW	PHS-1030-JGW	1/-/10
12	P-1230-JGW	—	—	1/-/10



Катетер с J-образным кончиком


Размер катетера, Fr/Ch	· без гидрофильного покрытия	· без гидрофильного покрытия; · со струнным замком	Упаковка (инд./гр./гр.)
8	BP-0830-LGW	BPS-0830-LGW	1/25/50
10	BP-1030-LGW	BPS-1030-LGW	1/25/50
12	BP-1230-LGW	—	1/25/50

Размерный ряд наборов для перкутанной нефростомии одношаговой

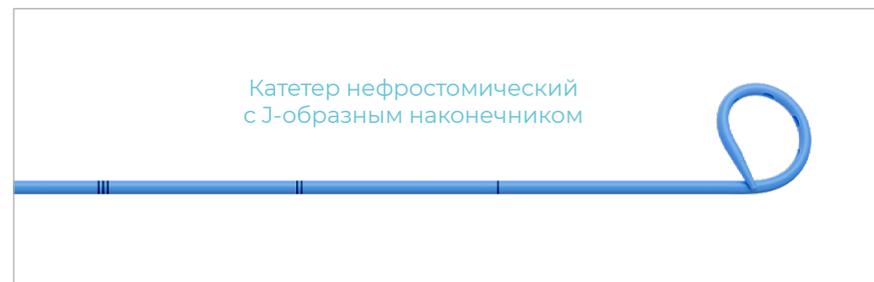

Размер катетера, Fr/Ch	· без гидрофильного покрытия	· без гидрофильного покрытия; · со струнным замком	· с гидрофильным покрытием; · со струнным замком	Упаковка (инд./гр./гр.)
8	P-0830-OS	PS-0830-OS	PHS-0830-OS	1/-/10
10	P-1030-OS	PS-1030-OS	PHS-1030-OS	1/-/10

Размерный ряд наборов для перкутанной нефростомии сменные

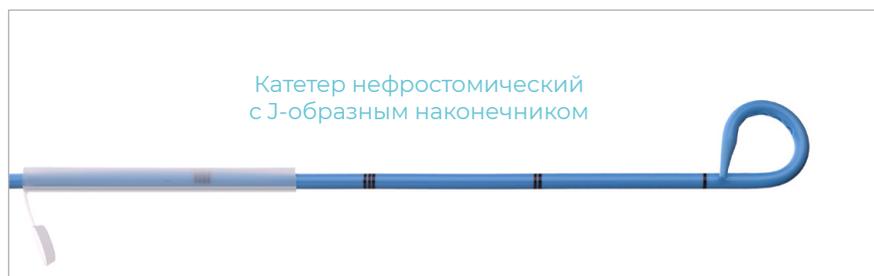

Размер катетера, Fr/Ch	· без гидрофильного покрытия	· с гидрофильным покрытием	Упаковка (инд./гр./гр.)
10	—	BPH-1030-R	1/80/320
12	BP-1230-R	—	1/80/320
14	BP-1430-R	—	1/80/320



АльфаМедЭкс