

# КАТЕТЕРЫ ФОЛЕЯ

- + Широкий ассортимент в зависимости от конструкции, материала и размера
- + Простые и безопасные в применении
- + Максимальный комфорт для каждого пациента
- + Универсальный коннектор канала для отведения мочи
- + Клапан для присоединения шприцев с разъемом Luer
- + Цветовая кодировка размера катетера
- + Стерильные, для одноразового применения



## Катетеры Фолея силиконовые

- + Широкая линейка: двухходовые педиатрические, женские, стандартные, с концом по Тиманну, трехходовые
- + Специальный изгиб конца катетера с оптимальной жесткостью для пациентов с обструктивной патологией уретры, аденомой простаты (с концом по Тиманну)
- + Проводник педиатрического катетера облегчает введение
- + Рентгенконтрастный наконечник и контрастная полоска вдоль стержня катетера
- + Не содержат латекс



Катетер Фолея силиконовый двухходовой педиатрический




Катетер Фолея силиконовый двухходовой женский



Катетер Фолея силиконовый двухходовой (стандартный)



Катетер Фолея силиконовый трехходовой

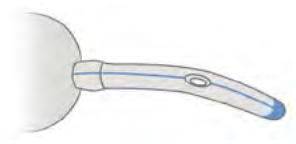

Катетер Фолея силиконовый двухходовой с концом по Тиманну



Прямой цилиндрический наконечник закрытого типа с двумя дренажными отверстиями, расположенными напротив

REF	Наружный диаметр, Ch/Fr	Объем баллона, мл	Длина, см	Цвет
Катетер Фолея силиконовый двухходовой педиатрический				
1604-M231-06	6	1,5	30	■
1604-M231-08	8	3	30	■
1604-M231-10	10	3-5	30	■
Катетер Фолея силиконовый двухходовой женский				
1604-M233-12	12	5-15	30	□
1604-M233-14	14	30-50	30	■
1604-M233-16	16	30-50	30	■
1604-M233-18	18	30-50	30	■
Катетер Фолея силиконовый двухходовой (стандартный)				
1604-M232-12	12	5-15	40	□
1604-M232-14	14	5-15	40	■
1604-M232-16	16	30-50	40	■
1604-M232-18	18	30-50	40	■
1604-M232-20	20	30-50	40	■
1604-M232-22	22	30-50	40	■
1604-M232-24	24	30-50	40	■
1604-M232-26	26	30-50	40	■
Катетер Фолея силиконовый двухходовой с концом по Тиманну				
1604-M234-12	12	5-15	40	□
1604-M234-14	14	5-15	40	■
1604-M234-16	16	30-50	40	■
1604-M234-18	18	30-50	40	■
1604-M234-20	20	30-50	40	■
1604-M234-22	22	30-50	40	■
1604-M234-24	24	30-50	40	■
Катетер Фолея силиконовый трехходовой				
1604-M206-16	16	30-50	40	■
1604-M206-18	18	30-50	40	■
1604-M206-20	20	30-50	40	■
1604-M206-22	22	30-50	40	■
1604-M206-24	24	30-50	40	■
1604-M206-26	26	30-50	40	■





## Катетеры Фолея латексные с силиконовым покрытием

- + Широкая линейка: двухходовые педиатрические, женские, стандартные, с концом по Тиманну, трехходовые
- + Специальный изгиб конца катетера с оптимальной жесткостью для пациентов с обструктивной патологией уретры, аденомой предстательной железы (с концом по Тиманну)
- + Экономичные катетеры
- + Проводник педиатрического катетера облегчает введение




Катетер Фолея двухходовой педиатрический

Катетер Фолея двухходовой женский



Катетер Фолея двухходовой

Катетер Фолея трехходовой

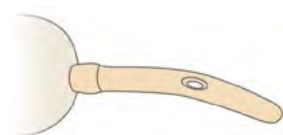


Наконечник по Тиманну с двумя дренажными отверстиями, расположенными напротив



Прямой цилиндрический наконечник закрытого типа с двумя дренажными отверстиями, расположенными напротив

REF	Наружный диаметр, Ch/Fr	Объем баллона, мл	Длина, см	Цвет
Катетер Фолея двухходовой педиатрический (латексный с силиконовым покрытием)				
1604-M211-06	6	3	27	■
1604-M211-08	8	3-5	27	■
1604-M211-10	10	3-5	27	■
Катетер Фолея двухходовой женский (латексный с силиконовым покрытием)				
1604-M213-12	12	5-15	23	□
1604-M213-14	14	30-50	23	■
1604-M213-16	16	30-50	23	■
1604-M213-18	18	30-50	23	■
1604-M213-20	20	30-50	23	■
1604-M213-22	22	30-50	23	■
1604-M213-24	24	30-50	23	■
Катетер Фолея двухходовой (латексный с силиконовым покрытием стандартный)				
1604-M212-12	12	5-15	40	□
1604-M212-14	14	5-15	40	■
1604-M212-16	16	30-50	40	■
1604-M212-18	18	30-50	40	■
1604-M212-20	20	30-50	40	■
1604-M212-22	22	30-50	40	■
1604-M212-24	24	30-50	40	■
1604-M212-26	26	30-50	40	■
1604-M212-28	28	30-50	40	■
1604-M212-30	30	30-50	40	■
Катетер Фолея двухходовой с концом по Тиманну (латексный с силиконовым покрытием)				
1604-M214-14	14	5-15	40	■
1604-M214-16	16	5-15	40	■
1604-M214-18	18	30-50	40	■
1604-M214-20	20	30-50	40	■
1604-M214-22	22	30-50	40	■
1604-M214-24	24	30-50	40	■
Катетер Фолея трехходовой (латексный с силиконовым покрытием)				
1604-M205-16	16	30-50	40	■
1604-M205-18	18	30-50	40	■
1604-M205-20	20	30-50	40	■
1604-M205-22	22	30-50	40	■
1604-M205-24	24	30-50	40	■
1604-M205-26	26	30-50	40	■
1604-M205-28	28	30-50	40	■
1604-M205-30	30	30-50	40	■

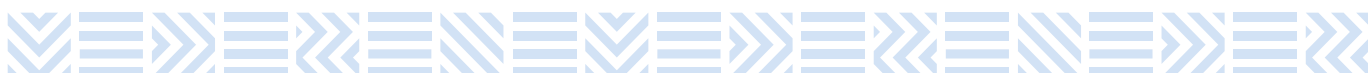



## Катетеры Фолея латексные с гидрофильным покрытием

- + Широкая линейка: двухходовые педиатрические, женские, стандартные, трехходовые
- + Специальное гидрофильное покрытие поливинилпирролидон легко активируется водой
- + Проводник педиатрического катетера облегчает введение



Катетер Фолея двухходовой педиатрический



Катетер Фолея двухходовой женский




Катетер Фолея двухходовой



Катетер Фолея трехходовой

Катетеры с гидрофильным покрытием имеют индивидуальную упаковку, идеально подходящую для наполнения водой. **Активация гидрофильного покрытия необходима перед началом использования.** Вода делает катетеры мягче и пластичнее, а также активирует гидрофильный лубрикант, вызывая его набухание, обеспечивающее комфортное введение.

Активированный гидрофильный слой поливинилпирролидона

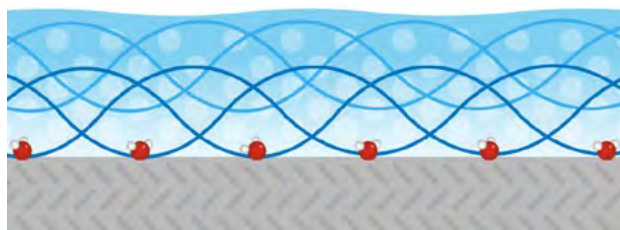

REF	Наружный диаметр, Ch/Fr	Объем баллона, мл	Длина, см	Цвет
Катетер Фолея двухходовой педиатрический с гидрофильным покрытием (латексный с гидрофильным покрытием)				
1604-M221-06	6	3	27	■
1604-M221-08	8	3-5	27	■
1604-M221-10	10	3-5	27	■
Катетер Фолея двухходовой женский с гидрофильным покрытием (латексный с гидрофильным покрытием)				
1604-M223-12	12	5-15	23	□
1604-M223-14	14	30-50	23	■
1604-M223-16	16	30-50	23	■
1604-M223-18	18	30-50	23	■
1604-M223-20	20	30-50	23	■
1604-M223-22	22	30-50	23	■
1604-M223-24	24	30-50	23	■
1604-M223-26	26	30-50	23	■
Катетер Фолея двухходовой с гидрофильным покрытием (латексный с гидрофильным покрытием стандартный)				
1604-M222-12	12	5-15	40	□
1604-M222-14	14	5-15	40	■
1604-M222-16	16	30-50	40	■
1604-M222-18	18	30-50	40	■
1604-M222-20	20	30-50	40	■
1604-M222-22	22	30-50	40	■
1604-M222-24	24	30-50	40	■
1604-M222-26	26	30-50	40	■
1604-M222-28	28	30-50	40	■
1604-M222-30	30	30-50	40	■
Катетер Фолея трехходовой с гидрофильным покрытием (латексный с гидрофильным покрытием)				
1604-M208-16	16	30-50	40	■
1604-M208-18	18	30-50	40	■
1604-M208-20	20	30-50	40	■
1604-M208-22	22	30-50	40	■
1604-M208-24	24	30-50	40	■
1604-M208-26	26	30-50	40	■
1604-M208-28	28	30-50	40	■
1604-M208-30	30	30-50	40	■






**Катетеры Фолея Mederen®** показаны для уретральной катетеризации мочевого пузыря при невозможности самостоятельного мочеиспускания или сильном его затруднении в связи с травмой, либо заболеванием. Возможна как кратковременная, так и долговременная установка катетеров с целью отведения мочи, а также для проведения диагностических и лечебных манипуляций, в том числе в послеоперационном периоде.

### Цветовая кодировка размеров канала для отведения мочи по шкале Шарьера/Френч, Ch/Fr




### Материал. Продолжительность катетеризации

Силикон	1 нед.	2 нед.	3 нед.	4 нед.	5 нед.	6 нед.
Латекс, покрытый силиконом	1 нед.					
Латекс с гидрофильным покрытием	1 нед.					

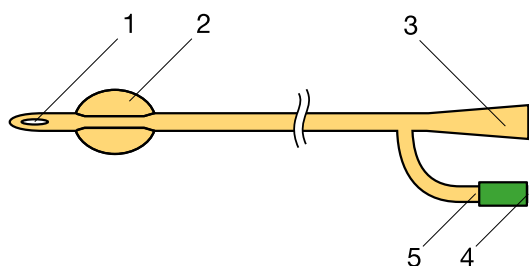


#### Катетер Фолея двухходовой

- 1 - дренажные отверстия
- 2 - баллон
- 3 - дренажный порт
- 4 - порт балона
- 5 - антивозвратный клапан

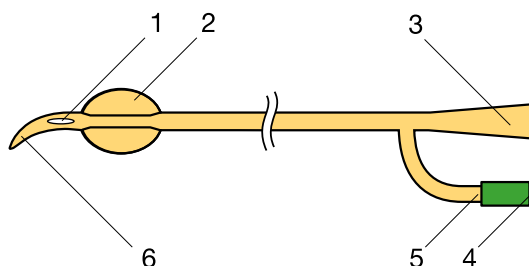

#### Катетер Фолея двухходовой с концом Тиманну

- 1 - дренажные отверстия
- 2 - баллон
- 3 - дренажный порт
- 4 - порт балона
- 5 - антивозвратный клапан
- 6 - конец по Тиманну

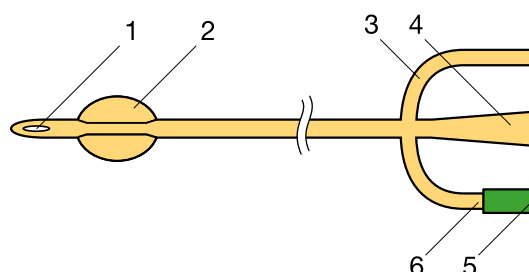


#### Катетер Фолея трехходовой

- 1 - дренажные отверстия
- 2 - баллон
- 3 - дополнительный канал для промывания и введения лекарственных средств
- 4 - дренажный порт
- 5 - порт балона
- 6 - антивозвратный клапан



**ВНИМАНИЕ!** При затруднении извлечения катетера вследствие невозможности аспирации дистиллированной воды или физиологического раствора из баллона катетера необходимо произвести пункцию иглой, сделать микронадрез ниже уровня клапана катетера или полностью отрезать клапан. Это способствует снижению давления в фиксирующем баллоне, и позволяет беспрепятственно извлечь катетер.

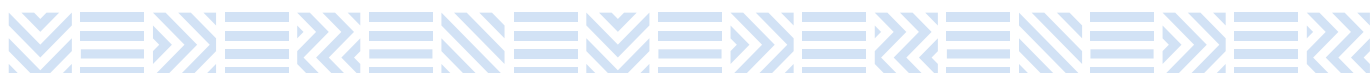



Регистрационное удостоверение: № РЗН 2018/7238 от 06.06.2018 г.



**MEDEREN® Neotech Ltd.**

Harakevet St. 58, Tel Aviv-Jaffa, Israel, 6777016.

Ph.: +97233760773

[www.mederen.com](http://www.mederen.com) • [info@mederen.com](mailto:info@mederen.com)



**Компания АЛЬФАМЕДЭК® — официальный дистрибьютор продукции MEDEREN® на территории РФ**

197022 г. Санкт-Петербург, ул. Академика Павлова, д. 5, тел.: +7 (812) 627-21-41

115093 г. Москва, ул. Большая Серпуховская, д. 19/37 стр. 4, тел.: +7 (499) 350-85-81

[www.alfamedex.ru](http://www.alfamedex.ru) • [info@alfamedex.ru](mailto:info@alfamedex.ru)



URO-2018/7238-2-2018